




Технологии движения

Гвоздь интрамедуллярный бедренный для перипротезных переломов

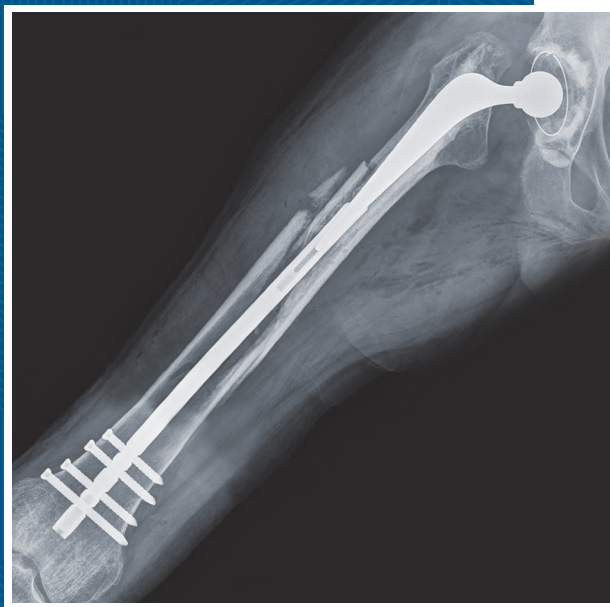

МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ ВНУТРИКОСТНОГО ОСТЕОСИНТЕЗА



Современные технологии и многолетний опыт позволяют ФГУП «ЦИТО» выпускать уникальные медицинские изделия, не уступающие по качеству и надежности лучшим зарубежным образцам.

Федеральное государственное унитарное предприятие «ЦИТО» Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (ФГУП «ЦИТО» Минпромторга России), основанное в 1963 году — одно из ведущих российских предприятий медицинской промышленности. Выпускаемую предприятием продукцию можно разделить на два направления.

Первое — медицинские изделия для травматологии и ортопедии. Второе — оказание услуг индивидуального протезирования и ортезирования, включая комплексную систему реабилитации, а также производство комплектующих для ортопедических изделий.

В области медицинских изделий для травматологии и ортопедии ФГУП «ЦИТО» производит широкий ассортимент имплантируемых изделий для накостного и внутрикостного остеосинтеза, аппаратов внешней фиксации, оборудования для скелетного вытяжения, а также инструмент для установки имплантатов.

Предприятие активно проводит собственные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и приглашает клиницистов к сотрудничеству.

Гвоздь интрамедуллярный бедренный для перипротезных переломов

Разработка ФГУП «ЦИТО»
совместно с к.м.н. А. Н. Челноковым



Изготавливается из титанового сплава

Преимущества

- ▶ Изготавливается индивидуально по рентгенограмме, КТ, МРТ или в соответствии с идентичностью компонентов модели эндопротеза.
- ▶ Приемная гильза обеспечивает надежную посадку на компонент эндопротеза тазобедренного или коленного сустава.
- ▶ Обеспечивает фиксацию зоны перелома без удаления установленного ранее компонента эндопротеза.
- ▶ Обеспечивает фиксацию обнажения зоны перелома как со стабильной, так и нестабильной ножкой.
- ▶ Возможна коррекция положения смещенной нестабильной ножки.
- ▶ Стабилизация винтов в блокирующих отверстиях для обеспечения фиксации гвоздя в канале даже при неудовлетворительном качестве костной ткани.

Комплект инструментов для установки

Кондуктор для фиксации гвоздей
интрамедуллярных бедренных

Комплект троакара (Ø8,0 мм) с направляющими

Отвертка (L=350,0 мм)

Молоток щелевидный с направляющей

Измеритель глубины канала (L=100,0 мм)


Скалки Ø4,9 и 6,0 мм

Ключ комбинированный 11×11 ГОСТ 16983-80

Сверла: Ø4,0 мм, L=310,0 мм и Ø5,0 мм, L=310,0 мм


Дополнительно по заказу: шилья канюлированные,
развёртки, набор долот желобковых

Клинический пример установки гвоздя интрамедуллярного бедренного для пери- протезных переломов

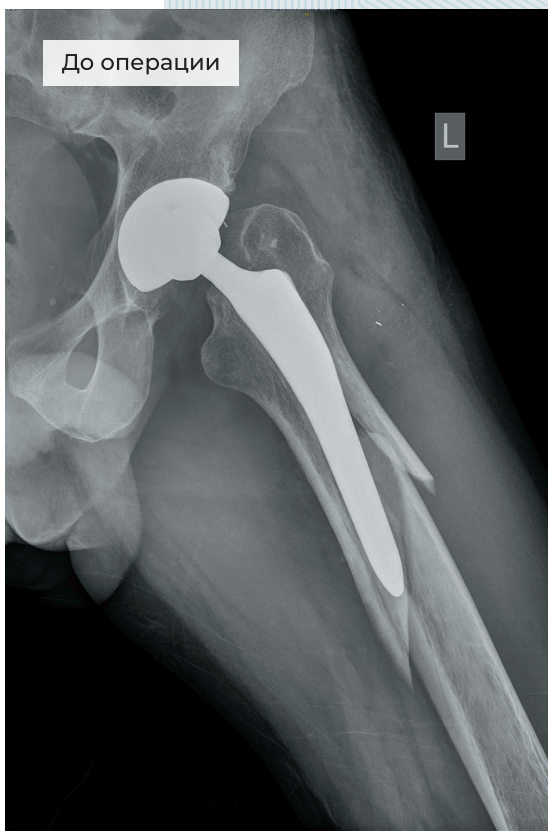

После операции

L

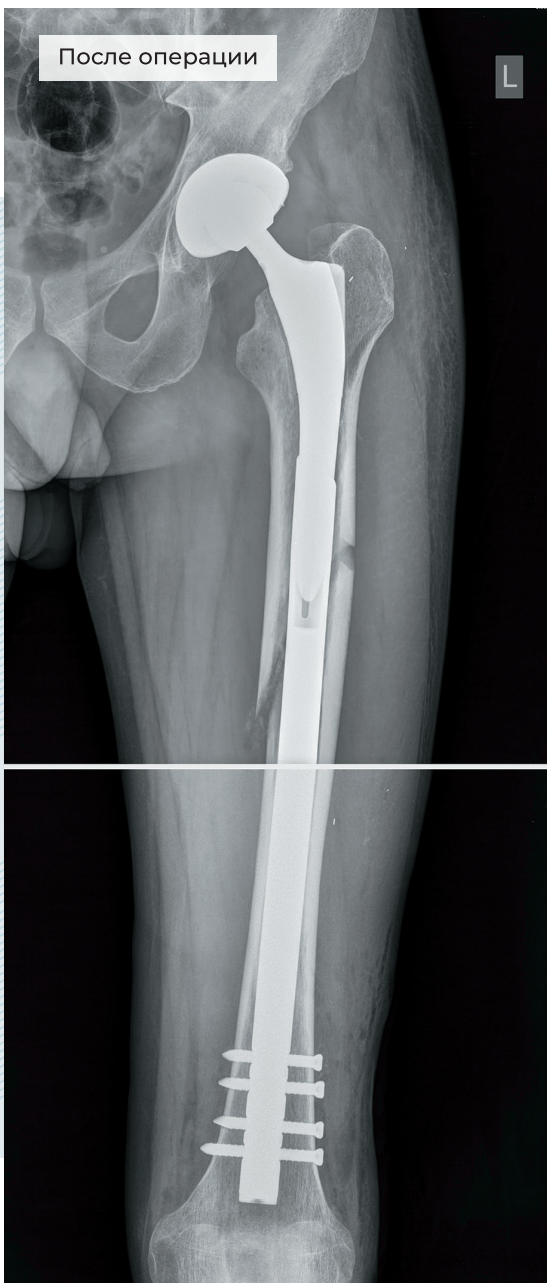

Информация для заказа

Гвоздь интрамедуллярный бедренный для перипротезных переломов

Артикул: 02.49.1

Ø и длина в артикуле не указываются и определяются при составлении заказа.

Винты блокирующие

Артикул	Диаметр винта, мм
02.50.49XX	4,9
02.50.60XX	6,0

XX — требуемая длина винта

Комплект инструментов для установки

Комплект инструментов предоставляется по запросу.

Данные для разработки чертежа:

- ▶ ФИО пациента, оперируемая нога (правая/левая);
- ▶ наименование и типоразмер установленного эндопротеза;
- ▶ замеры описанной окружности ножки эндопротеза по длине через каждые 10 мм (от 10 до 50 мм), начиная с конца (вид сбоку, вид спереди или размер диагонали);
- ▶ рентгеновские снимки с рентгеноконтрастным образцом;
- ▶ длина гвоздя (по короткой стороне), с учетом посадки гвоздя на ножку эндопротеза (на 35–40 мм).

ФГУП «ЦИТО» Минпромторга России

127299, Москва, ул. Приорова, д. 10, стр. 7

Телефон отдела продаж:

+7 (495) 450 43 94

E-mail: osb@cito-pro.ru

ВКонтакте: vk.com/fgup_cito

Telegram: [@fgupcito](https://t.me/fgupcito)

www.cito-pro.ru

