



CILITA

- ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ
- ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ
- ГИНЕКОЛОГИЯ
- И ДРУГИЕ

хирургический инструмент



Уважаемые дамы и господа!
Вас приветствует компания ООО «ЦИЛИТА».

Мы рады предоставить Вашему вниманию каталог хирургического инструментария. На его страницах мы постарались учесть потребности и пожелания врачей-хирургов. Для Вашего удобства каталог разделен на тематические блоки по типу инструментов. Каждый тип инструмента, представленный в классическом варианте, мы постарались дополнить вариантом с улучшенными характеристиками.

Обратите внимание на инструментарий нового поколения:

- с твердым сплавом (армирование);
- ножницы Super Cut;
- титановый инструмент.

Армирование твердым сплавом – это способ увеличения прочности основного материала путем напыления материала с повышенными прочностными свойствами. Благодаря этому увеличивается срок службы инструмента, его рабочие характеристики. Для удобного распознавания и выделения на фоне других у армированного инструмента имеется золотистое напыление на ручках.

Ножницы Super Cut – ножницы специальной конструкции, у которых одно лезвие заточено «под ножницы», а другое - как лезвие ножа. Ножницы, у которых работает вся длина режущей кромки от самых кончиков. Они одинаково удобны для использования «правшой» и «левшой». Это ножницы, которые с одинаковой легкостью режут в горизонтальной и вертикальной плоскости. Для удобного распознавания и выделения на фоне других у ножниц Super Cut имеется черное хромированное напыление на ручках.

Титановый инструмент – инструмент премиум-класса. Удобный в работе, легкий, но очень прочный, обладает такими преимуществами, как устойчивость к коррозии (стойк в растворах кислот и щелочей), материал не магнитный с низкой электропроводностью, инертный металл по отношению к биологической среде (высокая совместимость с биологическим организмом).

1. Пинцеты	4
1.1. Пинцеты стальные	4
1.2. Пинцеты титановые	6
2. Хирургические ножницы	8
3. Зажимы кровоостанавливающие	16
3.1. Зажимы кровоостанавливающие стальные	16
3.1. Зажимы кровоостанавливающие из титанового сплава	20
3.2. Зажимы специального назначения	22
4. Иглодержатели	24
4.1. Иглодержатели общехирургические стальные	24
4.2. Иглодержатели общехирургические из титанового сплава	26
5. Специальный инструмент для общей хирургии	29
5.1. Зеркала	29
5.2. Крючки	30
5.3. Ранорасширители	31
5.4. Зонды	35
5.5. Роторасширители	35
5.6. Хирургические ножи	36
6. Гинекология	37
6.1. Акушерство и родовспоможение	55
7. Оториноларингология	59
8. Нейрохирургия	66
9. Травматология	71
10. Урология	78
11. Стоматология	79
12. Наборы для лицензирования медицинской деятельности	81

Пинцеты анатомические



GF-00-10 длиной 100 мм

GF-00-13 длиной 125 мм

GF-122 длиной 145 мм

GF-06-10016 длиной 160 мм

GF-06-10018 длиной 180 мм

GF-125 длиной 200 мм

GF-126 длиной 250 мм

GF-002-30 длиной 300 мм



GF-10-11 деликатная модель, длиной 115 мм

GF-10-13 деликатная модель, длиной 125 мм

GF-322 деликатная модель, длиной 150 мм

GF-202 деликатная модель, длиной 200 мм

GF-204 деликатная модель, 250 мм



GF-15-11 изогнутый, длиной 115 мм

GF-15-12 изогнутый, длиной 125 мм

Пинцеты хирургические



GF-008-10 длиной 100 мм

GF-008-12 длиной 120 мм

GF-142 длиной 145 мм

GF-143 длиной 160 мм

GF-06-25018 длиной 180 мм

GF-145 длиной 200 мм

GF-146 длиной 250 мм



GF-612 деликатная модель, длиной 100 мм

GF-613 деликатная модель, длиной 120 мм

GF-352 деликатная модель, длиной 150 мм

GF-262 деликатная модель, длиной 200 мм

GF-264 деликатная модель, длиной 250 мм



GF-152 2x3 зубый, длиной 150 мм

GF-158 2x3 зубый, длиной 200 мм

GF-162 3x4 зубый, длиной 150 мм

GF-172 4x5 зубый, длиной 150 мм

Пинцеты по ADSON



GF-300 анатомический, длиной 120 мм

GF-322 A анатомический, длиной 160 мм

GF-330 микрохирургический, 1x2 зубый, длиной 120 мм



GF-422 микрохирургический, по ADSON-BRAUN, длиной 120 мм

GF-81-12 микрохирургический, горизонтально-изогнутый, длиной 120 мм

Пинцеты по ADSON в TWO-TONE

Новинка! Специальное покрытие TWO-TONE

GF-100-12 анатомический, длиной 120 мм



Пинцеты по ADSON с твердым сплавом

GF-103-12 анатомический, длиной 120 мм

GF-107-12 микрохирургический, длиной 120 мм



Пинцеты специального назначения

GF-777-618 анатомический, горизонтально-изогнутый, с платформой 15 мм, длиной 155 мм

GF-02797-18 анатомический, горизонтально-изогнутый, с платформой 15 мм, длиной 180 мм



GF-380 зубчатолопчатый, длиной 150 мм

GF-382 зубчатолопчатый, длиной 200 мм



GF-30-14 зубчатый 7x8, изогнутый вовнутрь, модификация зубчатолопчатого, длиной 150 мм



GF-98-15 анатомический, с шахматной насечкой, длиной 150 мм



GFK-90-09 рабочие кончики в виде лопаток 5 мм, длиной 90 мм



Пинцеты атравматические

GF-50-16 атравматический, тонкий (кончики 1 мм), длиной 160 мм

GF-50-20 атравматический, тонкий (кончики 1 мм), длиной 200 мм



GF-108-12 атравматический, армированный твердым сплавом, кончики 1 мм, по ДеБекки, длиной 150 мм



GF-6419 атравматический, армированный твердым сплавом, кончики 2 мм, по ДеБекки, длиной 200 мм



Пинцеты анатомические



GF-5062 длиной 160 мм

GF-5063 длиной 180 мм

GF-5064 длиной 200 мм

GF-5065 длиной 240 мм



GF-81511T прямой, деликатный, длиной 180 мм
(GF-1511T)

GF-81531T прямой, деликатный, длиной 210 мм
(GF-1531T)



GF-81512T изогнутый под углом, деликатный,
(GF-1512T) длиной 180 мм

GF-81532T изогнутый под углом, деликатный,
(GF-1532T) длиной 210 мм

Пинцеты хирургические



GF-5080 длиной 160 мм

GF-5081 длиной 180 мм

GF-5082 длиной 200 мм

GF-5083 длиной 240 мм

Пинцеты анатомические по ADSON



GF-1401T с плоской ручкой, твердосплавными кончиками, прямой, без платформы, длиной 120 мм




Без платформы, прямой

GF-1406T с плоской ручкой, твердосплавными кончиками, прямой, без платформы, длиной 150 мм



GF-1402T с плоской ручкой, твердосплавными кончиками, прямой, с платформой, длиной 120 мм

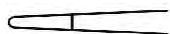

С платформой, прямой

GF-1407T с плоской ручкой, твердосплавными кончиками, прямой, с платформой, длиной 150 мм



GF-1403T с плоской ручкой, твердосплавными кончиками, изогнутый, с платформой, длиной 120 мм



С платформой, изогнутый

GF-1408T с плоской ручкой, твердосплавными кончиками, изогнутый, с платформой, длиной 150 мм

Пинцеты хирургические по ADSON



GF-1411T с плоской ручкой, твердосплавными кончиками, прямой, без платформы, 1x2 зубый, длиной 120 мм

GF-1416T с плоской ручкой, твердосплавными кончиками, прямой, без платформы, 1x2 зубый, длиной 150 мм



GF-1412T с плоской ручкой, твердосплавными кончиками, прямой, с платформой, 1x2 зубый, длиной 120 мм

GF-1417T с плоской ручкой, твердосплавными кончиками, прямой, с платформой, 1x2 зубый, длиной 150 мм



GF-1413T с плоской ручкой, твердосплавными кончиками, изогнутый, с платформой, 1x2 зубый, длиной 120 мм

GF-1418T с плоской ручкой, твердосплавными кончиками, изогнутый, с платформой, 1x2 зубый, длиной 150 мм

Пинцеты хирургические по ADSON-BRAUN




GF-1421T прямой, 7x7 зубый, с плоской ручкой, длиной 120 мм

GF-1422T изогнутый, 7x7 зубый, с плоской ручкой, длиной 120 мм

GF-1426T прямой, 7x7 зубый, с плоской ручкой, длиной 150 мм

GF-1427T изогнутый, 7x7 зубый, с плоской ручкой, длиной 150 мм

Пинцеты микрохирургические по BISHOP-HARMON

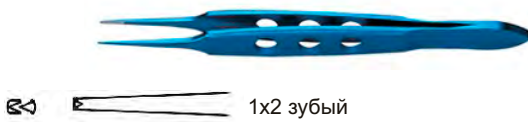

GF-1501T с твердосплавными кончиками 0,5 мм, с плоской ручкой, длиной 90 мм

GF-1502T с твердосплавными кончиками 0,3 мм, 1x2 зубый, с плоской ручкой, длиной 90 мм

Пинцеты атравматические



GF-81106T кончики 2,0 мм, с плоской ручкой, длиной 150 мм

GF-81116T кончики 2,0 мм, с плоской ручкой, длиной 180 мм

GF-81126T кончики 2,0 мм, с плоской ручкой, длиной 200 мм

GF-81146T кончики 2,0 мм, с плоской ручкой, длиной 240 мм

Хирургические ножницы армированные твердым сплавом с одним острым концом




GS-056 длиной 140 мм

Хирургические ножницы армированные твердым сплавом тупоконечные



GS-057 вертикально-изогнутые, длиной 140 мм
GS-060 вертикально-изогнутые, длиной 175 мм
GS-058 прямые, длиной 140 мм

Хирургические ножницы армированные твердым сплавом тупоконечные Metzanbaum-Fine

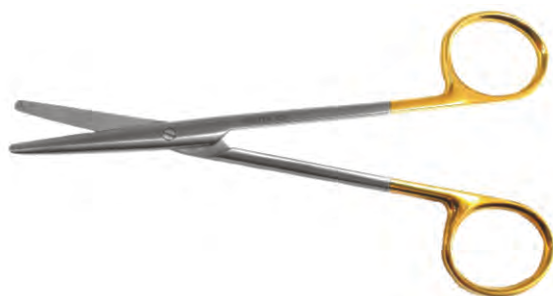

GS-062 прямые, длиной 140 мм
GS-063 прямые, длиной 175 мм
GS-40-20 прямые, длиной 205 мм
GS-40-23 прямые, длиной 230 мм
GS-073 вертикально-изогнутые, длиной 140 мм
GS-074 вертикально-изогнутые, длиной 175 мм
GS-075 вертикально-изогнутые, длиной 205 мм
GS-41-20 вертикально-изогнутые, длиной 230 мм

Хирургические ножницы армированные твердым сплавом тупоконечные Metzanbaum



DGS-1035D вертикально-изогнутые, длиной 115 мм

Хирургические ножницы армированные твердым сплавом «ТС»
+ заточка «SCT» Metzanbaum



GSST-1035D вертикально-изогнутые,
длиной 115 мм

GSST-1025D остроконечные, прямые,
длиной 115 мм

GSST-1035-17 горизонтально-изогнутые, длина 175 мм

GSST-1035-20 тупоконечные, горизонтально-изогнутые,
длина 200 мм

Хирургические ножницы армированные твердым сплавом
тупоконечные Mayo



GS-05-93316 вертикально-изогнутые, длиной 165 мм

Хирургические ножницы остроконечные армированные твердым сплавом
остроконечные DEAN



GSV-76-14 S-образные, длиной 165 мм

GSV-76-18 S-образные, армированные твердым
сплавом с заточкой SCT на одном
лезвии, длиной 180 мм

Хирургические ножницы остроконечные армированные твердым сплавом
сосудистые



GS-233-25 горизонтально изогнутые, 25°,
длиной 190 мм

GS-233-45 горизонтально изогнутые, 45°,
длиной 190 мм

GS-233-60 горизонтально изогнутые, 60°,
длиной 190 мм

GS-234-45 горизонтально изогнутые, 45°,
длиной 230 мм

Хирургические ножницы остроконечные с заточкой «SUPER CUT»



- DGS-1010 прямые, длиной 115 мм
- DGS-1014 вертикально-изогнутые, длиной 115 мм
- CS-1672-11 прямые, длиной 115 мм
- CS-1673-11 вертикально-изогнутые, длиной 115 мм
- CS-02725-13 вертикально-изогнутые, длиной 130 мм
- CS-01645-14 вертикально-изогнутые, длиной 140 мм

Хирургические ножницы с заточкой «SUPER CUT» с одним острым концом



- GS-01580 прямые, длиной 145 мм

Хирургические ножницы тупоконечные с заточкой «SUPER CUT» по Mayo-Stille



- CS-01588 прямые, SCT, длиной 170мм
- CS-01520 прямые, SCT, длиной 200мм
- CS-01589 вертикально- изогнутые, SCT, длиной 170 мм
- CS-01521 вертикально- изогнутые, SCT, длиной 200 мм

Хирургические ножницы с заточкой «SUPER CUT» тупоконечные



- CS-1596-11 прямые, SCT, длиной 115 мм
- CS-1597-11 вертикально-изогнутые, длиной 115 мм
- CS-01602 прямые, длиной 145 мм

Хирургические ножницы тупоконечные с заточкой «SUPER CUT» по Metzanbaum-Fine



- CS-01600 прямые, SCT, длиной 145 мм
- CS-01617 прямые, SCT, длиной 175 мм
- CS-1604 прямые, SCT, длиной 205 мм
- CS-01623 прямые, SCT, длиной 230 мм
- CS-01601 вертикально-изогнутые, SCT, длиной 145 мм
- CS-1661 вертикально-изогнутые, SCT, длиной 175 мм
- CS-1605 вертикально-изогнутые, SCT, длиной 205 мм
- 6S-023 вертикально-изогнутые, SCT, длиной 230 мм
- CS-01613 вертикально-изогнутые, S-образные, SCT, длиной 260 мм

Хирургические ножницы в TWO-TONE


Новинка! Специальное покрытие TWO-TONE тупоконечные



GS-300-14 вертикально-изогнутые, длиной 140 мм
GS-300-16 вертикально-изогнутые, длиной 160 мм

Хирургические ножницы в TWO-TONE


тупоконечные деликатные

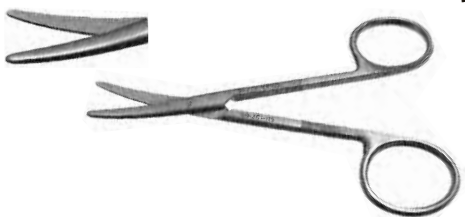

GS-301-115 вертикально-изогнутые, длиной 115 мм
GS-302-14 вертикально-изогнутые, длиной 145 мм
GS-302-115 прямые, длиной 115 мм
GS-301-14 прямые, длиной 145 мм

Хирургические ножницы в TWO-TONE

остроконечные

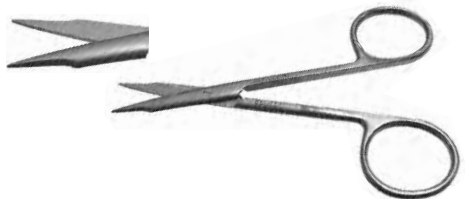

GS-372-11 прямые, длиной 110 мм
GS-373-12 вертикально-изогнутые, длиной 110 мм

Хирургические ножницы
тупоконечные прямые

GS-100 детские, длиной 130 мм
GS-102 длиной 140 мм
GS-104 длиной 150 мм
GS-106 длиной 175 мм

Хирургические ножницы
с одним острым концом прямые

GS-110 длиной 130 мм
GS-112 длиной 140 мм
GS-116 длиной 175 мм

Хирургические ножницы
остроконечные прямые

GS-122 длиной 140 мм
GS-124 длиной 150 мм
GS-126 длиной 175 мм

Новинка!

Хирургические ножницы остроконечные деликатные



- GS-260 прямые, длиной 150 мм
- GS-272-16 прямые, длиной 160 мм
- GS-273-16 вертикально-изогнутые, длиной 160 мм

Хирургические ножницы тупоконечные вертикально-изогнутые



- GS-130 детские, длиной 130 мм
- GS-132 длиной 140 мм
- GS-134 длиной 150 мм
- GS-136 длиной 175 мм

Хирургические ножницы остроконечные вертикально-изогнутые



- GS-152 длиной 140 мм
- GS-154 длиной 150 мм
- GS-156 длиной 175 мм

Хирургические ножницы остроконечные миниатюрные




- GS-1001 прямые, длиной 90 мм
- GS-530 прямые, длиной 110 мм

- GS-1101 вертикально-изогнутые, длиной 90 мм
- GS-532 вертикально-изогнутые, длиной 110 мм

- GS-572 вертикально-изогнутые, с тонкой режущей кромкой по Стивенсу, длиной 110 мм
- GS-305-13 вертикально-изогнутые, с тонкой режущей кромкой по Стивенсу, длиной 130 мм

- DGS-1023D остроконечные, вертикально-изогнутые, S-образные, длиной 110 мм

Хирургические ножницы модифицированные по Mayo

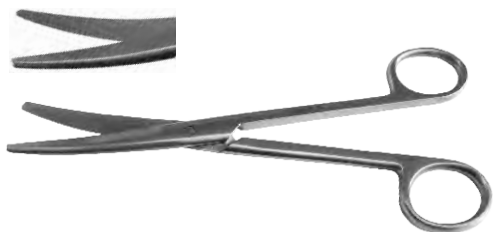


- GS-194 вертикально-изогнутые, с желобком на лезвии, длиной 170 мм
GS-212 тупоконечные, вертикально-изогнутые, по Mayo-Stille, длиной 170 мм

Хирургические ножницы модифицированные тупоконечные препаровальные



- GS-220 вертикально-изогнутые, длиной 145 мм
GS-222 вертикально-изогнутые, длиной 165 мм
GS-226 прямые, длиной 145 мм
GS-228 прямые, длиной 165 мм
GS-5217 прямые, длиной 170 мм

Хирургические ножницы модифицированные тупоконечные Metzenbaum

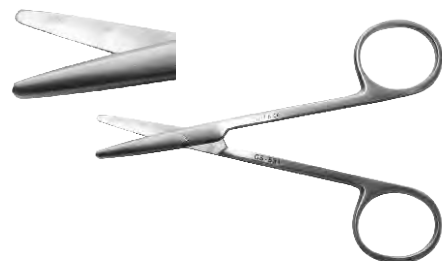


- GS-531 прямые, детские, длиной 115 см
GS-534 вертикально-изогнутые, детские, длиной 115 см

Хирургические ножницы для рассечения мягких тканей в глубоких полостях тупоконечные



- GS-244 прямые, тонкие, длиной 255 мм
GS-254 вертикально-изогнутые, тонкие, длиной 230 мм
GS-256 вертикально-изогнутые, тонкие, длиной 250 мм
GS-246 ST прямые, длиной 250 мм
GS-246 вертикально-изогнутые, длиной 250 мм
GS-543 вертикально-изогнутые, длиной 280 мм

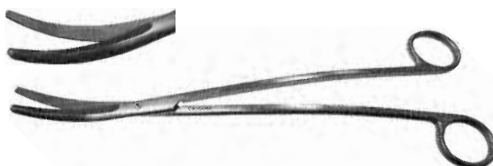

- CS-02049 вертикально-изогнутые, S-образные, длиной 245 мм

Хирургические ножницы специального назначения для снятия швов



- GS-62-09 длиной 90 мм
- GS-62-11 длиной 120 мм
- GS-76-11 горизонтально-изогнутые, длиной 120 мм

- CS-01958 прямые, длиной 115 мм
- DGS-1073D прямые, длиной 155 мм
- CS-01959 вертикально-изогнутые, длиной 115 мм

Хирургические ножницы специального назначения сосудистые остроконечные




- DGV-1001 сосудистые, горизонтально изогнутые, 45°, длиной 185 мм

- GS-154-11 горизонтально-изогнутые по радиусу, длиной 115 мм
- GS-155-11 горизонтально-изогнутые, 45°, длиной 115 мм

- GS-5216 прямые, тонкие, длиной 175 мм

- GS-80-01-18 вертикально-изогнутые, 45°, длиной 170 мм

Микрохирургические ножницы остроконечные

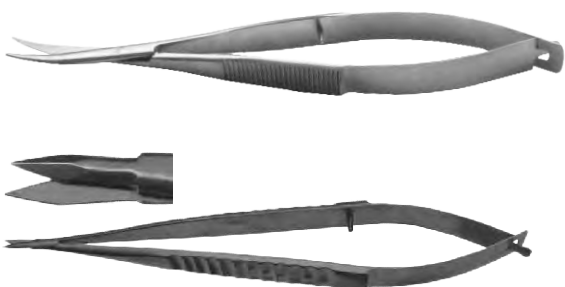

- GS-550 вертикально-изогнутые, плоская ручка, длиной 90 мм
- GS-560 вертикально-изогнутые, пружинные, длиной 105 мм
- GS-312-18 прямые, плоская ручка, длиной 180 мм

- GS-34-184-16 копьевидные, прямые, длиной 165 мм

Хирургические ножницы для снятия повязок
и перевязочного материала



GS-1041 с пуговкой, горизонтально-изогнутые, для разрезания повязок, длиной 115 мм

GS-1051 с пуговкой, горизонтально-изогнутые, для разрезания повязок, длиной 145 мм

GS-1061 с пуговкой, горизонтально-изогнутые, для разрезания повязок, длиной 180 мм



GS-1061-1 с пуговкой, горизонтально-изогнутые, упрочненные, длиной 210 мм



GS-146 с одним острым концом, прямые, для перевязочного материала, длиной 235 мм

**Зажимы кровоостанавливающие стальные
модификация Spenser-Wells**



- DGF-1002** прямой, Spenser-Wells, длина 155 мм
- DGF-1004** прямой, Spenser-Wells, длина 180 мм
- DGF-1005** прямой, Spenser-Wells, длина 200 мм



- DGF-1007** вертикально-изогнутый, Spenser-Wells, длина 155 мм
- DGF-1009** вертикально-изогнутый, Spenser-Wells, длина 180 мм
- DGF-1010** вертикально-изогнутый, Spenser-Wells, длина 200 мм

**Зажимы кровоостанавливающие стальные
деликатные**



- DDAF-1001** прямой, деликатный, длина 155 мм
- DGF-1075** прямой, деликатный, длина 200 мм
- DGF-1076** прямой, деликатный, длина 260 мм



- DGF-1035** вертикально-изогнутый, деликатный, длина 160мм
- DGF-1077** вертикально-изогнутый, деликатный, длина 200 мм
- DGF-1078** вертикально-изогнутый, деликатный, длина 260 мм

**Зажимы кровоостанавливающие стальные
типа «Москит»**



- DGF-1013** прямой, детский, типа «Микро-Москит», длина 90 мм
- GF-1301** прямой, детский, длина 100 мм
- GF-1401** прямой, длина 125 мм
- GF-61712z** прямой, деликатный, детский, длина 125 мм
- GF-1701** прямой, длина 140 мм
- GF-318** прямой, длина 180 мм



- GF-1321** вертикально-изогнутый, детский, типа «Микро-Москит», длина 100 мм
GF-1421 вертикально-изогнутый, длина 125 мм
GF-61713z вертикально-изогнутый, деликатный, детский, длина 125 мм
GF-1721 вертикально-изогнутый, длина 140 мм
GF-319 звертикально-изогнутый, длина 180 мм



- GF-210** горизонтально- изогнутый, длина 140 мм
GF-255-12 горизонтально- изогнутый, с шахматной насечкой, длина 140 мм
DDAF-1004 1x2 зубый, горизонтально-изогнутый, длина 140 мм

Зажимы кровоостанавливающие типа «Пеан»



- GF-2402** вертикально-изогнутый, длина 140 мм
GF-2341 вертикально-изогнутый, длина 160 мм
GF-2401 прямой, длина 140 мм
GF-2421 прямой, длина 160 мм

Зажимы кровоостанавливающие типа «Бильрот»



- GF-2521** прямой, длина 160 мм
GF-2541 прямой, длина 200 мм
GF-2561 прямой, длина 260 мм



- GF-2621** вертикально-изогнутый, длина 160 мм
GF-2641 вертикально-изогнутый, длина 200 мм
GF-2661 вертикально-изогнутый, длина 260 мм

**Зажимы кровоостанавливающие
типа «Кохер»**



- DHF-1015D** 1x2 зубый, прямой, детский, длина 120 мм
- DGF-1025** 1x2 зубый, прямой, деликатный, длина 145 мм
- DGF-1079** 1x2 зубый, прямой, деликатный, длина 200 мм



- GF-3731** 1x2 зубый, прямой, длина 160 мм
- GF-3751** 1x2 зубый, прямой, длина 200 мм
- GF-3771** 1x2 зубый, прямой, длина 270 мм



- DGF-1120** 1x2 зубый, вертикально-изогнутый, деликатный, длина 120 мм
- DGF-1026** 1x2 зубый, вертикально-изогнутый, деликатный, длина 145 мм
- DGF-1081** 1x2 зубый, вертикально-изогнутый, деликатный, длина 200 мм



- GF-3831** 1x2 зубый, вертикально-изогнутый, длина 160 мм
- GF-3851** 1x2 зубый, вертикально-изогнутый, длина 200 мм
- GF-3871** 1x2 зубый, вертикально-изогнутый, длина 270 мм

**Зажимы кровоостанавливающие
атравматические**



- GF-13716z** прямой, по ДеБекки, длина 160 мм
- GF-18920z** прямой, по ДеБекки, длина 200 мм
- GF-13717z** вертикально-изогнутый, по ДеБекки, длина 160 мм
- GF-19020z** вертикально-изогнутый, по ДеБекки, длина 200 мм










- GF-18912z** прямой, типа «Москит», длина 125 мм
- GF-18914z** прямой, типа «Москит», длина 140 мм
- GF-19012z** вертикально-изогнутый, типа «Москит», длина 120 мм
- GF-19014z** вертикально-изогнутый, типа «Москит», длина 140 мм

Зажимы кровоостанавливающие атравматичные сосудистые

	GF-377-13	вертикально-изогнутый, S-образный, длина 125 мм
	GF-378-16	изогнут вверх на 30°, длина 160 мм
	GF-379-17	J-образная рабочая часть, S-образный, длина 160 мм
	GF-354-26	J-образная рабочая часть, S-образный, длина 270 мм
	GF-1802	для пережатия аорты и крупных сосудов по Сатинскому, длина 210 мм

Зажимы кровоостанавливающие атравматические типа «Бульдог»

	GF-7410	прямой, бранши длиной 10 мм
	GF-7414	прямой, бранши длиной 15 мм
	GF-7420	прямой, бранши длиной 20 мм, длина 60 мм
	GF-7420B	прямой, бранши длиной 20 мм, длина 80 мм
	GF-7510	вертикально-изогнутый, бранши длиной 10 мм, длина 50 мм
	GF-7514	вертикально-изогнутый, бранши длиной 15 мм, длина 50 мм
	GF-7520	вертикально-изогнутый, бранши длиной 20 мм, длина 55 мм



GF-7600 двойной бульдог, прямой

Зажимы специального назначения клипсы




DGF-301-35 вертикально-изогнутый, длина 35 мм
DGF-301-45 вертикально-изогнутый, длина 40 мм

Зажимы специального назначения




DGF-317-00 для наложения клипс, с фиксатором, длина 230 мм

**Зажимы кровоостанавливающие из титанового сплава
типа «Москит»**

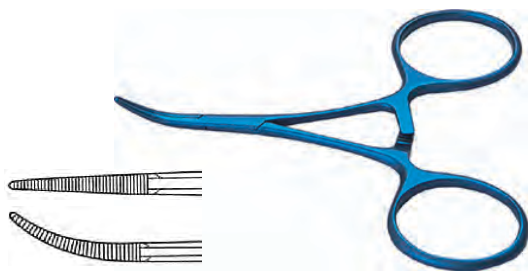


- GF-6101T** зубчатый, прямой, длина 100 мм
- GF-6102T** зубчатый, вертикально-изогнутый, длина 100 мм

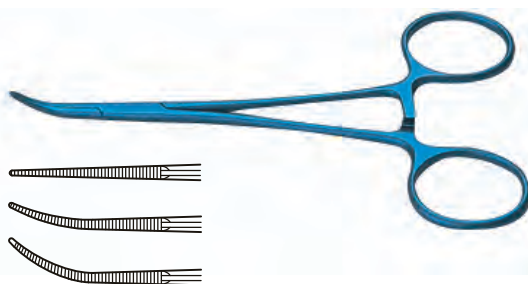


- GF-6221T** зубчатый, прямой, длина 125 мм
- GF-6222T** зубчатый, прямой, 1х2 зубый, длина 125 мм
- GF-6223T** зубчатый, вертикально-изогнутый, длина 125 мм
- GF-6224T** зубчатый, вертикально-изогнутый, 1х2 зубый, длина 125 мм
- GF-6225T** зубчатый, вертикально-изогнутый, деликатный, длина 125 мм
- GF-6226T** зубчатый, вертикально-изогнутый, 1х2 зубый, деликатный, длина 125 мм

**Зажимы кровоостанавливающие из титанового сплава
типа «Москит» деликатные**

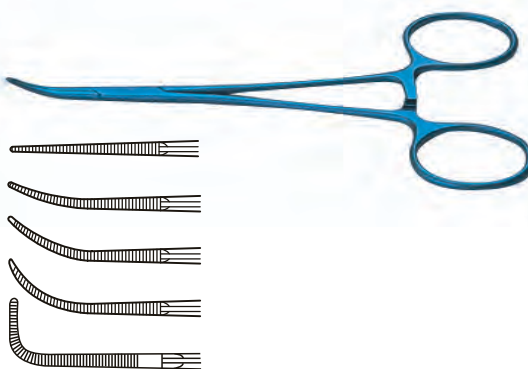


- GF-6211T** зубчатый, прямой, длина 125 мм
- GF-6212T** зубчатый, прямой, 1х2 зубый, длина 125 мм
- GF-6213T** зубчатый, вертикально-изогнутый, длина 125 мм
- GF-6214T** зубчатый, вертикально-изогнутый, 1х2 зубый, длина 125 мм
- GF-6215T** зубчатый, вертикально-изогнутый под углом 45°, длина 125 мм
- GF-6216T** зубчатый, вертикально-изогнутый под углом 45°, 1х2 зубый, длина 125 мм
- GF-6217T** зубчатый, вертикально-изогнутый под углом 60°, длина 125 мм
- GF-6218T** зубчатый, вертикально-изогнутый под углом 60°, 1х2 зубый, длина 125 мм
- GF-6219T** зубчатый, вертикально-изогнутый под углом 90°, длина 125 мм
- GF-6220T** зубчатый, вертикально-изогнутый под углом 90°, 1х2 зубый, длина 125 мм

Зажимы кровоостанавливающие из титанового сплава по CRILE

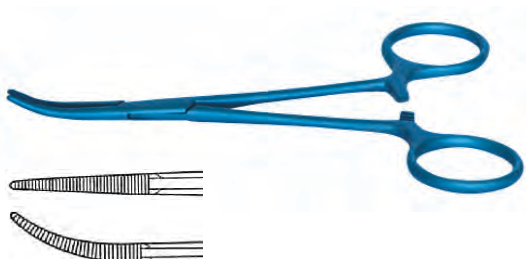

- GF-6301T зубчатый, прямой, длина 140 мм
- GF-6302T зубчатый, прямой, 1x2 зубый, длина 140 мм
- GF-6303T зубчатый, вертикально-изогнутый, длина 140 мм
- GF-6304T зубчатый, вертикально-изогнутый, 1x2 зубый, длина 140 мм
- GF-6311T зубчатый, прямой, длина 160 мм
- GF-6312T зубчатый, прямой, 1x2 зубый, длина 160 мм
- GF-6313T зубчатый, вертикально-изогнутый, длина 160 мм
- GF-6314T зубчатый, вертикально-изогнутый, 1x2 зубый, длина 160 мм

Зажимы кровоостанавливающие из титанового сплава по LERICHE

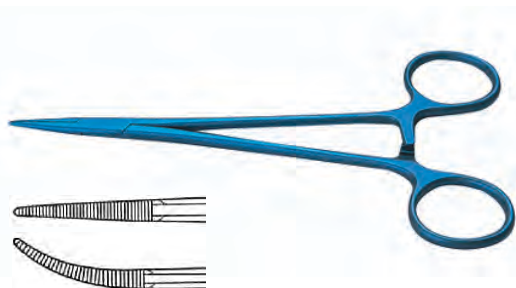

- GF-6401T прямой, с косой насечкой, короткими губками, длина 150 мм
- GF-6402T прямой, с косой насечкой, короткими губками, 1x2 зубый, длина 150 мм
- GF-6403T вертикально-изогнутый, с косой насечкой, короткими губками, длина 150 мм
- GF-6404T вертикально-изогнутый с косой насечкой, короткими губками, 1x2 зубый, длина 150 мм

Зажимы кровоостанавливающие из титанового сплава по Bengolea с шахматной насечкой



- GF-6531T прямой, длина 180 мм
- GF-6532T прямой, 1x2 зубый, длина 180 мм
- GF-6533T вертикально-изогнутый, длина 180 мм
- GF-6534T вертикально-изогнутый, 1x2 зубый, длина 180 мм
- GF-6561T прямой, длина 230 мм
- GF-6562T прямой, 1x2 зубый, длина 230 мм
- GF-6563T вертикально-изогнутый, длина 230 мм
- GF-6564T вертикально-изогнутый, 1x2 зубый, длина 230 мм
- GF-6563T вертикально-изогнутый, длина 230 мм

**Зажимы специального назначения стальные
диссектора**



- DDLF-1023 «Г»-образный, длина 180 мм
- DDLF-10131 «Г»-образный, длина 210 мм
- DDLF-1024 «Г»-образный, длина 240 мм
- DDLF-10132 «Г»-образный, длина 255 мм
- GHDL-10125 изогнут вверх на 90°, длина 285 мм
- DDLF-10134 прямой, деликатный, длина 200 мм
- DDLF-10135 диссектор, прямой, длина 260 мм



- DDLF-10138 1x2 зубый, прямой, длина 210 мм
- DDLF-10139 1x2 зубый, вертикально-изогнутый, длина 260 мм

**Зажимы специального назначения
кишечные**



- GF-2021 по Аллису, длина 155 мм
- GF-0019 по Аллису, длина 190 мм
- GF-0025 по Аллису, длина 250 мм



- GF-390 кишечный, эластичный, прямой, длина 250 мм
- GF-4201 кишечный, эластичный, вертикально-изогнутый, длина 250 мм



- GF-370 кишечный, эластичный с косой насечкой, прямой, по Дойену, длина 235 мм
- GF-375 кишечный, эластичный, с косой насечкой, по Дойену, длина 230 мм

Зажимы специального назначения



- GF-680 для почечной ножки, длина 240 мм




- GF-129 для бронха, длина 245 мм



- GF-350 языкодержатель



GF-540 щипцы для снятия скобок Мишеля

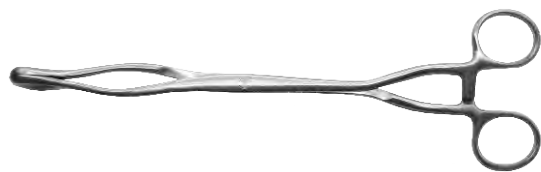


GF-170 щипцы геморроидальные, прямые, окончатые треугольной формы, длина 250 мм



GF-191007z щипцы кишечные, прямые, овально-окончатые (внутренний Ø 8 мм), по Хейвуду-Смиту, длина 200 мм

GF-146-21 щипцы кишечные, прямые, овально-окончатые (внутренний Ø 18 мм), по Хейвуду-Смиту, длина 210 мм

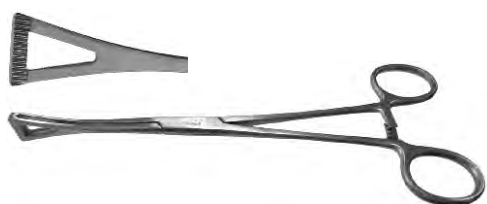

GF-356-20 щипцы с треугольной рабочей частью, длина 200 мм

**Зажимы для фиксации операционного белья
Микулича**



GF-860 для прикрепления операционного белья к брюшине, длина 200 мм

**Зажимы для фиксации операционного белья
«цапки»**



GF-980 без кремальеры, длина 90 мм



GF-908 с кремальерой, длина 90 мм

GF-911 с кремальерой, длина 110 мм

GF-914 с кремальерой, длина 130 мм

GF-915 с кремальерой, длина 150 мм

Корнцанги



GF-4900 прямой, длина 200 мм

GF-920 прямой, длина 250 мм

GF-4901 изогнутый, длина 200 мм

GF-922 изогнутый, длина 250 мм

Иглодержатели общехирургические стальные
«Мейо-Гегар»

DGN-3495	длина 145 мм
GN-131	длина 160 мм
GN-132	длина 180 мм
GN-133	длина 200 мм
GN-134	длина 250 мм
GN-135	длина 260 мм
GN-136	длина 300 мм


Новинка!

Иглодержатели общехирургические стальные
«Мейо-Гегар», деликатные

GN-830	длина 160 мм
GN-850	длина 180 мм
GN-105	длина 200 мм

Иглодержатели общехирургические стальные
«Матье»

GN-290	длина 140 мм
GN-292	длина 170 мм
GN-394-17	деликатный, длина 170 мм
GN-294	длина 200 мм

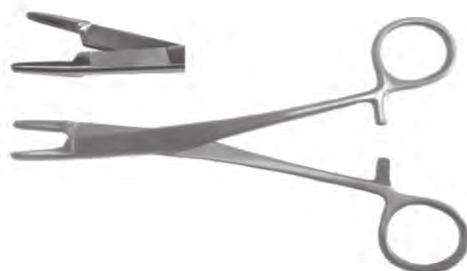
Иглодержатели общехирургические стальные
с ножницами «Олсен-Гегар»

GN-396-11	детский, длина 115 мм
GN-398-14	длина 140 мм
GN-262	длина 165 мм
GN-398-18	длина 180 мм
GN-272	длина 190 мм

Иглодержатели общехирургические стальные
по «Бойтону»

GNK-270-12	длина 120 мм
GN-525-12	изогнутый, деликатный, армированный твердым сплавом, длина 125 мм

Иглодержатели общехирургические стальные армированные твердым сплавом
«Мейо-Гегар»

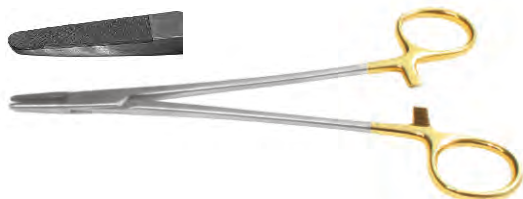

GN-001	длина 160 мм
GN-003	длина 200 мм
GN-004	длина 250 мм

Иглодержатели общехирургические стальные армированные твердым сплавом
сосудистые (с узкими губками)



GN-18213z	длина 130 мм
DGN-3550	длина 120 мм
GN-18215z	длина 150 мм
GN-18218z	длина 180 мм
GN-037	длина 200 мм
GN-18223z	длина 250 мм

Иглодержатели общехирургические стальные армированные твердым сплавом
«Матье»



GN-4017	длина 170 мм
GN-4020	длина 200 мм
GN-637-17	вертикально-изогнутый, длина 170 мм

Иглодержатели общехирургические стальные армированные твердым сплавом
с ножницами «Олсен-Гегар»



GN-598-11	детский, длина 115 мм
GN-610-14	длина 140 мм

Иглодержатели микрохирургические стальные
армированные твердым сплавом




DGN-1038	с замком, длина 130 мм
----------	------------------------

**Иглодержатели общехирургические титановые
с твердосплавными кончиками
и кольцевидными ручками**



- GN-2401T губки 1.2x12 мм, длина 120 мм
- GN-2402T губки 1.5x14.5 мм, длина 120 мм
- GN-2403T губки 1.8x14.5 мм, длина 120 мм
- GN-2407T губки 1.3x14 мм, длина 140 мм
- GN-2408T губки 1.7x17 мм, длина 140 мм
- GN-2409T губки 2.1x17 мм, длина 140 мм
- GN-2413T губки 1.5x15 мм, длина 180 мм
- GN-2414T длина губки 2.0x18 мм, 180 мм
- GN-2415T губки 2.5x18 мм, длина 180 мм
- GN-2404T губки 1.2x12 мм, длина 130 мм
- GN-2405T губки 1.6x14.5 мм, длина 130 мм
- GN-2406T губки 2.0x14.5 мм, длина 130 мм
- GN-2410T губки 1.4x14 мм, длина 160 мм
- GN-2411T губки 1.8x17 мм, длина 160 мм
- GN-2412T губки 2.2x17 мм, длина 160 мм

**Иглодержатели общехирургические титановые
с зауженными губками и твердосплавными кончиками,
кольцевидными ручками «RYDER»**

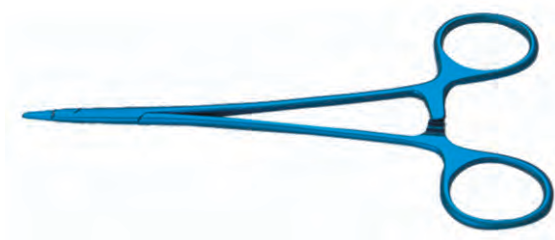

- GN-2501T губки 1.4x10 мм, длина 150 мм
- GN-2502T губки 1.4x11 мм, длина 170 мм
- GN-2503T губки 1.4x12 мм, длина 190 мм

Иглодержатели микрохирургические титановые с твердосплавными кончиками круглыми ручками, длиной 140 мм

GN-2101T	прямой, без замка, кончики 0,3 мм	GN-2109T	прямой, без замка, кончики 1,0 мм
GN-2102T	прямой, с замком, кончики 0,3 мм	GN-2110T	прямой, с замком, кончики 1,0 мм
GN-2103T	изогнутый, без замка, кончики 0,3 мм	GN-2111T	изогнутый, без замка, кончики 1,0 мм
GN-2104T	изогнутый, с замком, кончики 0,3 мм	GN-2112T	изогнутый, с замком, кончики 1,0 мм
GN-2105T	прямой, без замка, кончики 0,5 мм	GN-2113T	прямой, без замка, кончики 1,5 мм
GN-2106T	прямой, с замком, кончики 0,5 мм	GN-2114T	прямой, с замком, кончики 1,5 мм
GN-2107T	изогнутый, без замка, кончики 0,5 мм	GN-2115T	изогнутый, без замка, кончики 1,5 мм
GN-2108T	изогнутый, с замком, кончики 0,5 мм	GN-2116T	изогнутый, с замком, кончики 1,5 мм
		GN-2117T	прямой, без замка, кончики 2,0 мм



Иглодержатели микрохирургические титановые с твердосплавными кончиками круглыми ручками, длиной 180 мм

GN-2131T	прямой, без замка, кончики 0,3 мм	GN-2147T	прямой, без замка, кончики 2,0 мм
GN-2135T	прямой, без замка, кончики 0,5 мм	GN-2140T	прямой, с замком, кончики 1,0 мм
GN-2132T	прямой, с замком, кончики 0,3 мм	GN-2148T	прямой, с замком, кончики 2,0 мм
GN-2136T	прямой, с замком, кончики 0,5 мм	GN-2141T	изогнутый, без замка, кончики 1,0 мм
GN-2133T	изогнутый, без замка, кончики 0,3 мм	GN-2149T	изогнутый, без замка, кончики 2,0 мм
GN-2137T	изогнутый, без замка, кончики 0,5 мм	GN-2142T	изогнутый, с замком, кончики 1,0 мм
GN-2134T	изогнутый, с замком, кончики 0,3 мм	GN-2150T	изогнутый, с замком, кончики 2,0 мм
GN-2139T	прямой, без замка, кончики 1,0 мм		



Иглодержатели микрохирургические титановые с твердосплавными кончиками круглыми ручками

GN-2151T	прямой, без замка, кончики 0,5 мм, длина 200 мм	GN-2171T	прямой, без замка, кончики 0,5 мм, длина 230 мм
GN-2152T	прямой, с замком, кончики 0,5 мм, длина 200 мм	GN-2172T	прямой, с замком, кончики 0,5 мм, длина 230 мм
GN-2153T	изогнутый, без замка, кончики 0,5 мм, длина 200 мм	GN-2173T	изогнутый, без замка, кончики 0,5 мм, длина 230 мм
GN-2154T	изогнутый, с замком, кончики 0,5 мм, длина 200 мм	GN-2174T	изогнутый, с замком, кончики 0,5 мм, длина 230 мм
GN-2155T	прямой, без замка, кончики 1,0 мм, длина 200 мм	GN-2175T	прямой, без замка, кончики 1,0 мм, длина 230 мм
GN-2156T	прямой, с замком, кончики 1,0 мм, длина 200 мм	GN-2176T	прямой, с замком, кончики 1,0 мм, длина 230 мм
GN-2157T	изогнутый, без замка, кончики 1,0 мм, длина 200 мм	GN-2177T	изогнутый, без замка, кончики 1,0 мм, длина 230 мм
GN-2158T	изогнутый, с замком, кончики 1,0 мм, длина 200 мм	GN-2178T	изогнутый, с замком, кончики 1,0 мм, длина 230 мм
GN-2159T	прямой, без замка, кончики 2,0 мм, длина 200 мм	GN-2179T	прямой, без замка, кончики 2,0 мм, длина 230 мм
GN-2160T	прямой, с замком, кончики 2,0 мм, длина 200 мм	GN-2180T	прямой, с замком, кончики 2,0 мм, длина 230 мм
GN-2161T	изогнутый, без замка, кончики 2,0 мм, длина 200 мм	GN-2181T	изогнутый, без замка, кончики 2,0 мм, длина 230 мм
GN-2162T	изогнутый, с замком, кончики 2,0 мм, длина 200 мм	GN-2182T	изогнутый, с замком, кончики 2,0 мм, длина 230 мм



Иглодержатели микрохирургические титановые с твердосплавными кончиками плоскими ручками

GN-2201T	прямой, без замка, кончики 0,7 мм, длина 140 мм	GN-2205T	прямой, без замка, кончики 1,2 мм, длина 140 мм
GN-2202T	прямой, с замком, кончики 0,7 мм, длина 140 мм	GN-2206T	прямой, с замком, кончики 1,2 мм, длина 140 мм
GN-2203T	изогнутый, без замка, кончики 0,7 мм, длина 140 мм	GN-2207T	изогнутый, без замка, кончики 1,2 мм, длина 140 мм
GN-2204T	изогнутый, с замком, кончики 0,7 мм, длина 140 мм	GN-2208T	изогнутый, с замком, кончики 1,2 мм, длина 140 мм



Зеркала ректальные



- GM-120** трехстворчатое
- GM-100** двухстворчатое со сплошными губками
GM-110 двухстворчатое с отверстиями на губках
- GM-722** одностворчатое, длина 22 мм

Зеркала хирургические для брюшной стенки



- GR-310** длина 240мм
- GR-372-04** ширина ложки 45 мм, по Fritsch
GR-955-60 ширина ложки 60 мм, по Fritsch
GR-955-80 ширина ложки 80 мм, по Fritsch
GR-955-100 ширина ложки 100 мм, по Fritsch
- GR-5582** для глубоких полостей, лопаточный,
рабочая часть ширина 75 мм и длина
75 мм, по DAVIDSON
- GR-5604** Г-образное, 10–50 мм, длина 200 мм
GR-09-391-01 для отведения печени, 45–80 мм, длина 250 мм
GR-09-391-02 для отведения печени, 55–80 мм, длина 250 мм
GR-09-391-03 для отведения печени, 65–90 мм, длина 250 мм

Зеркало хирургическое двустороннее



- GR-292** двустороннее, рабочая часть 75x80 мм
и 55x40 мм, длина 280 мм,
по Richardson-Eastman

Крючки зубчатые длиной 220 мм



GR-210	однозубый, острый	GR-186	двухзубый, тупой
GR-181	двухзубый, острый	GR-187	трехзубый, тупой
GR-182	трехзубый, острый	GR-188	четырёхзубый, тупой
GR-183	четырёхзубый, острый	GR-188-1	четырёхзубый, тупой, №4, рабочая часть 40x40 мм, длина 235 мм
GR-184	шестизубый, острый	GR-189	шестизубый, тупой

Крючки зубчатые длиной 160 мм



GR-152	двухзубый, острый, детский	GR-09-138-02	двухзубый, тупой, детский
GR-008-03	трехзубый, острый, детский	GR-09-138-03	трехзубый, тупой, детский
GR-09-132-04	четырёхзубый, острый, детский		

Крючки зубчатые модифицированные



GR-196-01	однозубый, условно острый, тонкий, длина 190 мм, BROM	GR-09-124-02	однозубый, тупой, с желобком, длина 170 мм
------------------	---	---------------------	--

Крючки пластинчатые по Фарабефу



GR-100	парный, длина 120 мм
GR-102	парный, длина 150 мм




GR-97200z	окончатый, парный, длина 210 мм
------------------	---------------------------------

Механические ранорасширители речные




- GR-118 раскрытие от (0-70)мм, лопатки 20x80 мм
- GR-118-00 раскрытие от (0-90)мм, лопатки 30x30 мм
- GR-118-01 раскрытие от (0-140)мм, лопатки 35x45 мм
- GR-118-02 раскрытие от (0-165)мм, лопатки 40x40 мм
- GR-118-2 раскрытие от (0-180) мм, лопатки 45x65 мм
- GR-118-3 раскрытие от (0-180) мм, лопатки 100x35 мм
- GR-118-4 раскрытие от (0-205) мм, лопатки 115x35 мм

Механические ранорасширители речные окончатые

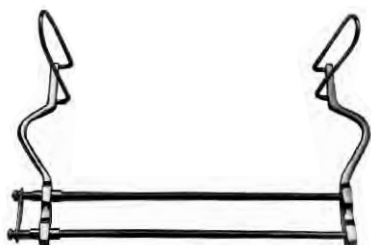


- GR-029-12 раскрытие (0-120) мм, лопатки 55x30 мм
- GR-029-14 раскрытие (0-140) мм, лопатки 65x35 мм
- GR-029-16 раскрытие (0-160) мм, лопатки 60x30 мм
- GR-029-18 раскрытие (0-180) мм, лопатки 100x35 мм
- GR-029-20 раскрытие (0-200) мм, лопатки 100x35 мм
- GR-029-24 раскрытие (0-240) мм, лопатки 105x40 мм
- GR-029-30 раскрытие (0-300) мм, лопатки 110x40 мм

Механические ранорасширители речные окончатые с дополнительными ложками

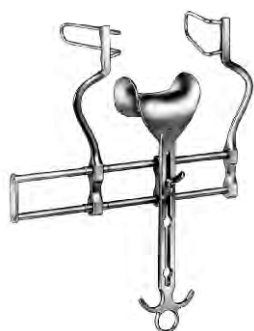

- GR-028-18 раскрытие (0-180) мм, лопатки 70x35 мм, ложка 80x45 мм
- GR-028-20 раскрытие (0-200) мм, лопатки 70x35 мм, ложка 80x45 мм

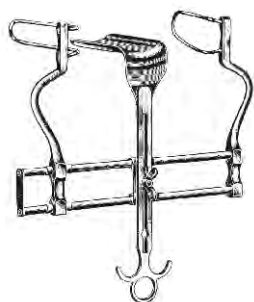

- GR-027-18 раскрытие (0-180) мм, лопатки 70x35 мм, ложка 80x45 мм
- GR-027-20 раскрытие (0-200) мм, лопатки 100x35 мм, ложка 100x70 мм
- GR-028-450 рамка 240x240 мм

Механические ранорасширители рамочные для глубоких полостей



GR-09-860-00

Абдоминальный ретрактор набор вариант №1 в составе:

09-860-01 рамка размером 300x300 мм

09-860-38 лопатка размером 38x60 мм

09-860-50 лопатка размером 50x65 мм



GR-09-865-00

Абдоминальный ретрактор набор вариант №2 в составе:

09-860-01 рамка размером 300x300 мм

09-860-38 лопатка размером 38x60 мм

09-860-50 лопатка размером 50x65 мм

09-865-45 лопатка размером 45x80 мм

09-865-60 лопатка размером 60x80 мм



GR-034-00

Механический ранорасширитель, овальный в составе:


GR-034-01 рамка 300x240 мм

GR-034-02 3 лопатки крючка размером 50x65 мм

GR-034-03 1 лопатка крючок размером 80x90 мм

GR-034-04 1 лопатка крючок размером 98x50 мм

GR-034-05 1 лопатка крючок размером 105x35 мм

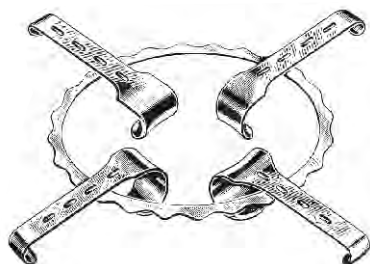

GR-035-00

Механический ранорасширитель, овальный в составе:

GR-035-01 рамка 175x150 мм


GR-035-02 2 лопатки крючка размером 40x30 мм

GR-035-03 2 лопатка крючок размером 40x40 мм



GR-09-865-00
Механический ранорасширитель, прямоугольный
в составе:

- GR-09-865-01 рамка 300x300 мм
- GR-09-865-38 2 лопатки крючка размером 38x60 мм
- GR-09-865-45 2 лопатки крючка размером 50x65 мм
- GR-09-865-50 3 лопатки крючка размером 50x60 мм
- GR-09-865-60 3 лопатки крючка размером 60x65 мм

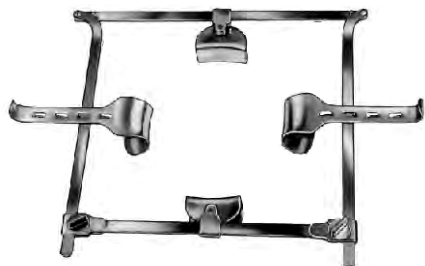


GR-09-860-00
Механический ранорасширитель прямоугольный
в составе:

- GR-09-860-01 рамка 300x300 мм
- GR-09-860-38 2 лопатки крючка размером 38x60 мм
- GR-09-860-50 2 лопатки крючка размером 50x65 мм



GR-030-00
Механический ранорасширитель овальный с тремя
лопатками (с возможностью добавления 4-ой)

- лопатка размером 80x45 изогнута вниз
- лопатка размером 80x45 вогнута
- лопатка размером 110x75 вогнута

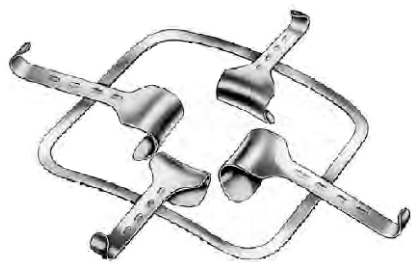

GR-031-00
Механический ранорасширитель прямоугольный
в составе:

- GR-031-01 рамка 240x240 мм
- GR-031-02 2 лопатки крючка размером 40x55 мм
- GR-031-03 2 лопатки крючка размером 50x65 мм

Механические ранорасширители с фиксатором



GR-3181 раскрытие (0-105) мм, лопатки 25x20 мм

Механические ранорасширители с кремальерой



GR-430 тупой, прямой, длина 130 мм, MILLIGAN
 GR-420 острый, прямой, длина 130 мм, MILLIGAN
 GR-447-14 тупой, прямой, длина 140 мм, MILLIGAN
 GR-426 тупой, прямой, длина 165 мм



GR-670-13 двузубый, острый, прямой, длина 130 мм



GR-265-00 тупой, плавно изогнутый, 6x6 зубый, длиной 265 мм



GR-672-10 двузубый, острый, правый, длина 100 мм
 GR-674-00 двузубый, острый, левый, длина 100 мм



GR-428-01 острый, изогнутый, длина 150 мм
 GR-446-19 острый, изогнутый, длина 190 мм



GR-440 тупой, длина 100 мм, JANSEN
 GR-440-1 острый, длина 100 мм, JANSEN



GR-450-09 острый, изогнутый, однозубый, длина 90 мм, GELPI
 GR-450-13 острый, изогнутый, однозубый, длина 130 мм, GELPI
 GR-450 острый, плавно изогнутый, однозубый, длина 180 мм, GELPI




Новинка! Специальное покрытие TWO-TONE

GR-440 TWO тупой, прямой, длина 100 мм, JANSEN
 GR-440-1 TW острый, прямой, длина 100 мм, JANSEN
 GR-430 TWO тупой, прямой, длина 130 мм, MILLIGAN



GR-450-13 TWO острый, однозубый, длина 130 мм, GELPI
 GR-450 TWO острый, однозубый, длина 190 мм, GELPI


Зонды пуговчатые

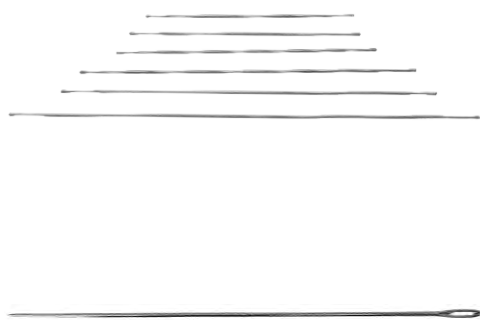

GD-100 set Набор пуговчатых зондов
(длиной 115, 140, 160, 180, 200, 250 мм)

GD-100 длина 115 мм
GD-102 длина 140 мм
GD-103 длина 160 мм
GD-104 длина 180 мм
GD-105 длина 200 мм
GD-106 длина 250 мм
TD-10-120-16 прямой с ушком, длина 160 мм
TD-10-120-16 прямой с ушком, длина 160 мм

Зонды желобоватые

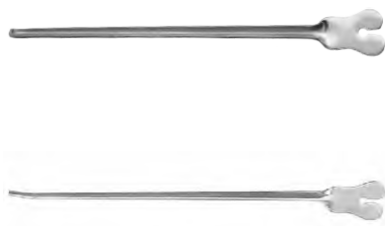

GD-132 длина 145 мм
GD-150-18 длина 180 мм
GR-160-11 с пуговкой, длина 120 мм
GD-1008-215 с пуговкой, длина 215 мм

GD-10-18016 длина 160 мм, Nelaton

Крючок зубчатый



GD-400 по Дешаму, левый, длина 210 мм
GD-402 по Дешаму, правый, длина 210 мм

Механические роторасширители



GR-170 винтовой, длина 130 мм

GR-140 кремальерой, длина 160 мм


GR-174-00 операционный, большой, Kilner-Doughty

Троакары



GA-120	диаметр рабочей части 3 мм
GA-122	диаметр рабочей части 4 мм
GA-124	диаметр рабочей части 5 мм
GA-126	диаметр рабочей части 6 мм
GA-128	диаметр рабочей части 10 мм

Хирургические ножи для биопсии конхотомного типа

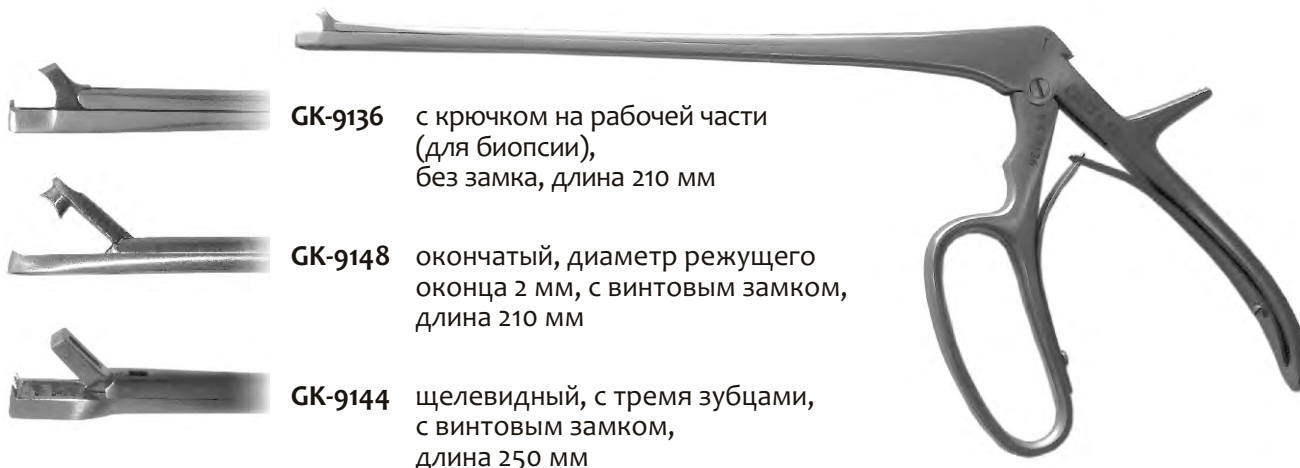

GK-9136 с крючком на рабочей части (для биопсии), без замка, длина 210 мм

GK-9148 окончатый, диаметр режущего конца 2 мм, с винтовым замком, длина 210 мм

GK-9144 щелевидный, с тремя зубцами, с винтовым замком, длина 250 мм

Хирургические ножи (скальпели) брюшистый



GK-188	длина 160 мм
GK-1402	малый 20 мм, длина 140 мм
GK-1405	средний 40 мм, длина 150 мм
GK-1408	большой 50 мм, длина 170 мм

Хирургические ножи (скальпели) ампутационный



GK-210	большой, длина 320 мм
GK-210-13	малый, длина 270 мм
GK-1101	остроконечный, средний, длина 150 мм

Ручки для скальпеля



GK-103	№3, размер 25x2 мм, длина 125 мм
GK-104	№4, размер 35x32 мм, длина 135 мм

Ручки для скальпеля с линейкой



GK-303	№3, размер 25x2 мм, длина 125 мм
GK-304	№4, размер 35x32мм, длина 135 мм
GK-203	№3, размер 25x2 мм, длина 210 мм
GK-204	№4, размер 35x32мм, длина 210 мм

Ножницы гинекологические тупоконечные




GS-057-20 прямые, длина 200 мм, рабочая часть 55 мм

GS-057-23 прямые, длина 230 мм, рабочая часть 65 мм

GS-058-20 вертикально-изогнутые, длина 200 мм, рабочая часть 55 мм

GS-058-23 вертикально-изогнутые, длина 230 мм, рабочая часть 65 мм

Ножницы гинекологические тупоконечные деликатные

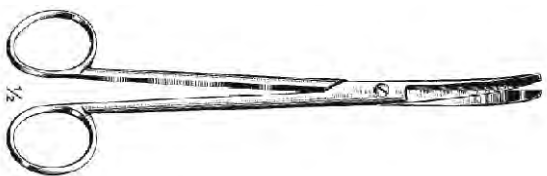

GS-056-14 вертикально-изогнутые, длина 145 мм, рабочая часть 50 мм

GS-056-19 вертикально-изогнутые, длина 195 мм, рабочая часть 55 мм

GS-056-23 вертикально-изогнутые, длина 230 мм, рабочая часть 60 мм

Ножницы гинекологические тупоконечные усиленные



GS-059-18 прямые, длина 180 мм, рабочая часть 75 мм, ширина кончика 6 мм

GS-060-18 вертикально-изогнутые, длина 180 мм, рабочая часть 75 мм, ширина кончика 6 мм

Ножницы гинекологические тупоконечные рабочая часть 60 мм



GS-061-22 прямые, длиной 220 мм

GS-063-27 прямые, длиной 270 мм

GS-062-22 вертикально-изогнутые, длиной 220 мм


GS-064-27 вертикально-изогнутые, длиной 270 мм

Ножницы гинекологические остроконечные рабочая часть 50 мм




- GS-065-20 прямые, длиной 200 мм
- GS-065-23 прямые, длиной 230 мм
- GS-066-20 вертикально-изогнутые, длиной 200 мм
- GS-066-23 вертикально-изогнутые, длиной 230 мм

Ножницы гинекологические с одним острым концом рабочая часть 50 мм

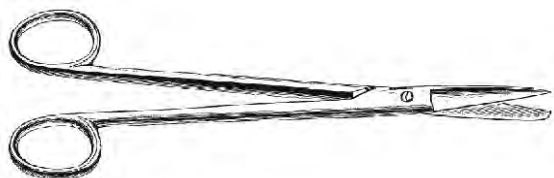

- GS-067-20 с одним острым концом, прямые, длиной 200 мм
- GS-067-23 прямые, длиной 230 мм
- GS-068-20 вертикально-изогнутые, длиной 200 мм
- GS-068-23 вертикально-изогнутые, длиной 230 мм

Ножницы гинекологические сильноизогнутые

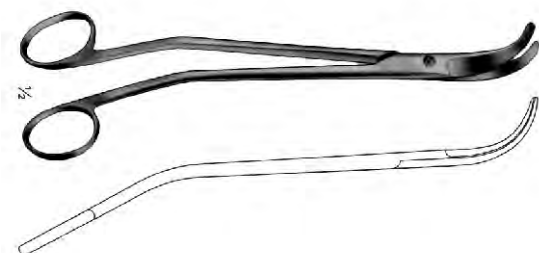

- GS-069-22 S-образная рабочая часть, общая длина 220 мм

Ножницы акушерские



- GG-500-10 прямые, рабочие части круглые, длиной 105 мм

Ножницы акушерские



- GG-400** тупоконечные, горизонтально-изогнутые, длиной 120 мм
- GG-501-15** с одним острым концом, латерально изогнутые, с пуговкой, длиной 155 мм
- GS-070-12** остроконечные, вертикально-изогнутая рабочая часть 20 мм, одно лезвие с засечками, длиной 120 мм

Пинцеты гинекологические




- GF-018-15** с двойным рядом деликатных зубчиков, длиной 150 мм
- GF-018-20** с двойным рядом деликатных зубчиков, длиной 200 мм
- GF-018-25** с двойным рядом деликатных зубчиков, длиной 250 мм
- GF-019-23** с острыми зубчиками на кончиках, длиной 230 мм
- GF-019-25** с острыми зубчиками на кончиках, длиной 250 мм
- GF-145** пинцет 1х2-зубый 200 мм
- GF-146** пинцет 1х2-зубый 250 мм
- GF-382** зубчатопалчатый, 200 мм

Зажим специального назначения: гинекологический вертикально-изогнутый с косой насечкой




- GF-522-21** длиной 210 мм, с одним выступом
- GF-523-21** длиной 210 мм, с двумя выступами
- GF-524-19** длиной 195 мм, с одним выступом

**Зажим специального назначения
вертикально-изогнутый с перекрестной насечкой**

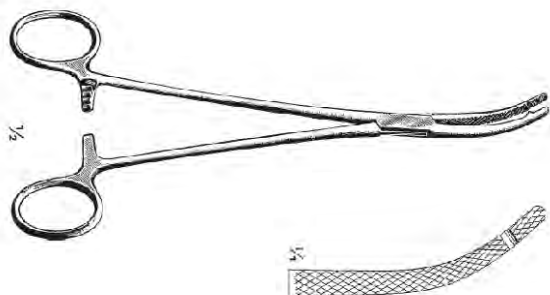


- GF-524-21 длиной 210 мм, с одним выступом
- GF-524-23 длиной 230 мм, с одним выступом
- GF-525-19 длиной 195 мм, с двумя выступами
- GF-525-21 длиной 210 мм, с двумя выступами
- GF-525-23 длиной 230 мм, с двумя выступами

**Зажим специального назначения
с параллельной насечкой**

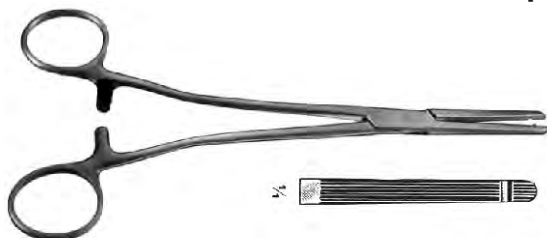

- GF-526-21 прямой, длиной 210 мм, с одним выступом
- GF-527-21 вертикально-изогнутый, длиной 210 мм, с одним выступом

Зажим специального назначения 1х зубый

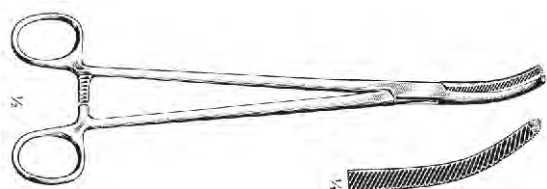


- GF-535-24 вертикально-изогнутый, длиной 245 мм, косая насечка

Зажим специального назначения 1х2 зубый



- GF-534-20 вертикально-изогнутый, длиной 200 мм
- GF-534-25 вертикально-изогнутый, длиной 250 мм

Зажим специального назначения с винтовым соединением

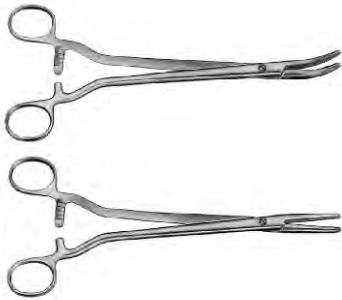

- GF-538-24 вертикально-изогнутый, длиной 240 мм
GF-539-23 вертикально-изогнутый, 1x2 зубый, длиной 235 мм



- GF-540-24 прямой, длиной 240 мм, косая насечка

Зажим специального назначения 1 x 2 зубый с винтовым соединением




- GF-541-23 плавно-изогнутый, 1x2 зубый, длиной 230мм



- GF-542-23 сильно-изогнутый, 1x2 зубый, длиной 230 мм




- GF-543-23 вертикально-изогнутый под углом, 1x2 зубый, длиной 230 мм

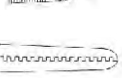

- GF-545-24 вертикально-изогнутый, 1x2 зубый, усиленный, длиной 240 мм

Зажим специального назначения Г-образный

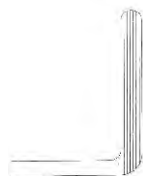

- GF-549-21 длиной 215 мм, параллельная насечка на изогнутой части, рабочая часть - 55мм
GF-550-60 длиной 230 мм, параллельная насечка по всей рабочей части, рабочая часть - 60 мм
GF-550-80 длиной 230 мм, параллельная насечка на изогнутой части, рабочая часть - 80 мм, винтовое соединение

Зажим специального назначения Г-образный



- GF-550-60** длиной 230 мм, параллельная насечка по всей рабочей части, рабочая часть - 60 мм
- GF-550-80** длиной 230 мм, параллельная насечка на изогнутой части, рабочая часть - 80 мм, винтовое соединение

Зажим специального назначения с двойной атравматической нарезкой




- GF-553-22** прямой, длиной 220 мм
- GF-553-25** прямой, длиной 250 мм
- GF-554-21** плавно-изогнутый, длиной 215 мм
- GF-554-25** плавно-изогнутый, длиной 250 мм
- GF-555-21** вертикально-изогнутый, длиной 210 мм
- GF-555-24** вертикально-изогнутый, длиной 245 мм
- GF-556-20** сильно-изогнутый, длиной 200 мм
- GF-556-23** сильно-изогнутый, длиной 230 мм
- GF-557-20** Г-образный, длиной 200 мм
- GF-557-23** Г-образный, длиной 230 мм

Зажим специального назначения S-образный с атравматической нарезкой



- GF-560-24** малым радиусом перегиба, длина 240 мм
- GF-561-24** стандартный радиус перегиба, длина 240 мм

**Зажим специального назначения
Г-образный с атравматической нарезкой**

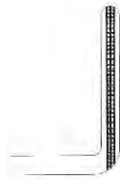



- GF-562-06 длиной 240 мм, рабочая часть 60 мм
 GF-562-08 длиной 240 мм, рабочая часть 85 мм
 GF-562-11 длиной 240 мм, рабочая часть 110 мм

**Зажим специального назначения с атравматической нарезкой
вертикально-изогнут под углом винтовое соединение**



- GF-563-25 длина 250 мм
 GF-563-27 длиной 270 мм

**Зажим специального назначения
с атравматической нарезкой двоякоизогнутый**

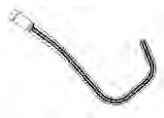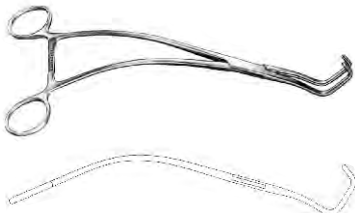

- GF-564-26 П-образный, длина 260 мм.
Длина между двумя перегибами
рабочей части 30 мм
 GF-565-26 П-образный, длина 260 мм.
Длина между двумя перегибами
рабочей части 20 мм

**Зажим специального назначения
с атравматической нарезкой**



- GF-530-22 прямой, длиной 220 мм
 GF-531-22 слабо-изогнутый, длиной 220 мм
 GF-532-22 сильно-изогнутый, длиной 220 мм
 GF-533-22 изогнутый под углом, длиной 200 мм

Зажим специального назначения маточный



GF-566-26 прямой, длина 260 мм, насечка на кончиках

GF-566-25 двоякоизогнутый, длина 250 мм, насечка на кончиках



GF-567-26 вертикально-изогнутый, длина 260 мм, кончики овальные, насечка на кончиках

GF-568-26 прямой, длина 260 мм, кончики овальные, насечка на кончиках



GF-569-25 S-образный, длина 250 мм, гладкие рабочие части

GF-570-25 S-образный, длина 250 мм, продольная насечка



GF-580-29 вертикально-изогнутый, длина 290 мм, рабочие части 120 мм, насечка на рабочих частях - 80 мм

Зеркало гинекологическое по Куско



GG-120 №00, детское, с кремальерой, шириной 10 мм

GG-130 №0, детское, винтовое, ширина зеркала, 75x17 мм




GG-100 №1 с винтовым фиксатором, ширина зеркала 80x22 мм

GG-102 №2 с винтовым фиксатором, ширина зеркала 100x25 мм


GG-104 №3 с винтовым фиксатором, ширина зеркала 105x27 мм

Зеркало гинекологическое по Педерсону

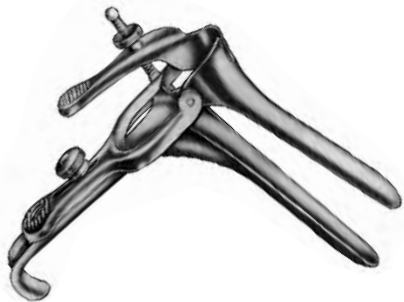

- GG-003-13** ширина зеркала 75x13 мм,
с двумя винтовыми фиксаторами
- GG-003-22** ширина зеркала 100x22 мм,
с двумя винтовыми фиксаторами
- GG-003-25** ширина зеркала 120x25 мм,
с двумя винтовыми фиксаторами

Зеркало гинекологическое по Грейву с отсасывающей трубкой

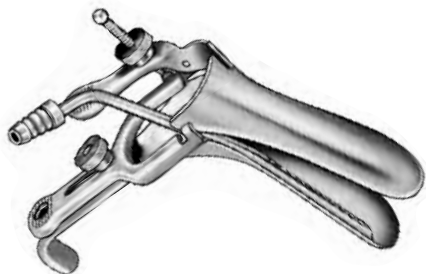

- GG-004-13** ширина зеркала 76x13 мм,
с двумя винтовыми фиксаторами
- GG-004-22** ширина зеркала 101x22 мм,
с двумя винтовыми фиксаторами
- GG-004-35** ширина зеркала 120x35 мм,
с двумя винтовыми фиксаторами


* под заказ со световодом

Зеркало гинекологическое по Симсу



- GG-140** №1, 65x25 мм и 70x30мм
- GG-142** №2, 70x30мм и 70x35мм
- GG-144** №3, 85x35мм и 90x40мм

Набор: зеркало и подъемник по Кальморгену

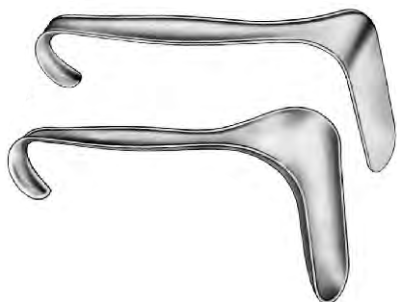

- GG-017-01** Набор №1:
зеркало 70x40 мм и подъемник 70x33 мм
- GG-017-02** Набор №2:
зеркало 90x40мм и подъемник 90x33 мм

Набор: зеркало и подъемник с короткой рабочей частью по Кристеллеру

- GG-008-01 Набор №1:**
зеркало 70x27 мм и подъемник 70x23 мм
- GG-008-02 Набор №2:**
зеркало 80x30 мм и подъемник 85x26 мм
- GG-008-03 Набор №3:**
зеркало 90x36 мм и подъемник 100x32 мм

Набор: зеркало слабо вогнутое и подъемник по Кристеллеру

- GG-011-01 Набор №1:**
зеркало 105x26 мм и подъемник 115x220 мм
- GG-011-02 Набор №2:**
зеркало 105x28 мм и подъемник 115x24 мм
- GG-011-03 Набор №3:**
зеркало 105x33 мм и подъемник 115x29 мм

Набор: зеркало сильно вогнутое и подъемник по Кристеллеру

- GG-014-01 Набор №1:**
зеркало 110x27 мм и подъемник 115x23 мм
- GG-014-02 Набор №2:**
зеркало 110x30 мм и подъемник 115x26 мм
- GG-014-03 Набор №3:**
зеркало 110x36 мм и подъемник 115x32 мм

Зеркала гинекологические по Дуайену



- GG-018-01 Набор №1:**
в составе 3 зеркала с длиной рабочей части 55 мм и шириной 35, 45, 60 мм
- GG-018-55** размером 55x35 мм
 - GG-019-55** размером 55x45 мм
 - GG-020-55** размером 55x60 мм



- GG-018-02 Набор №2:**
в составе 3 зеркала с длиной рабочей части 85 мм и шириной 35, 45, 60 мм
- GG-018-85** размером 85x35 мм
 - GG-019-85** размером 85x45 мм
 - GG-020-85** размером 85x60 мм



- GG-018-03 Набор №3:**
в составе 3 зеркала с длиной рабочей части 115 мм и шириной 35, 45, 60 мм
- GG-018-10** размером 115x35 мм, по Дуайену
 - GG-019-10** размером 115x45 мм, по Дуайену
 - GG-020-10** размером 115x60 мм, по Дуайену

Зеркала гинекологические Бриске




- GG-088-10 Комплект №1:**
в составе 5 зеркал с длиной рабочей части 100 мм и шириной 20, 25, 30, 35, 40 мм
- GG-088-20** размером 100x20 мм
 - GG-088-25** размером 100x25 мм
 - GG-088-30** размером 100x30 мм
 - GG-088-35** размером 100x35 мм
 - GG-088-40** размером 100x40 мм

Зеркала гинекологические Бриске



- GG-089-10 Комплект №2:**
в составе 5 зеркал с длиной рабочей части 130 мм и шириной 20, 25, 30, 35, 40 мм
- GG-089-20** размером 130x20 мм
- GG-089-25** размером 130x25 мм
- GG-089-30** размером 130x30 мм
- GG-089-35** размером 130x35 мм
- GG-089-40** размером 130x40 мм

Специальные гинекологические зеркала по Когану

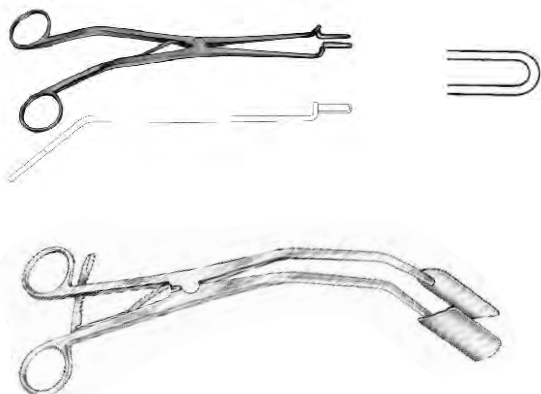


- GG-022-24** «эндозеркало» для диагностики без кремальеры, длиной 240 мм
- GG-023-24** «эндозеркало» для диагностики с винтовой кремальерой, длиной 240 мм
- GG-024-03** «эндозеркало» для диагностики с зубчатой кремальерой и браншами 3 мм
- GG-024-07** «эндозеркало» для диагностики с зубчатой кремальерой и браншами 7 мм
- GG-021-25** Хаки боковые по Ньюпорту, для облегчения осмотра шейки матки 250 мм

Расширители канала шейки матки



- GG-270** по Гегару (мелкие) **Новинка!**
- GG-280** по Гегару (комплект 14 шт.)
- CG-290 set** по Гегару (комплект 49 шт.)

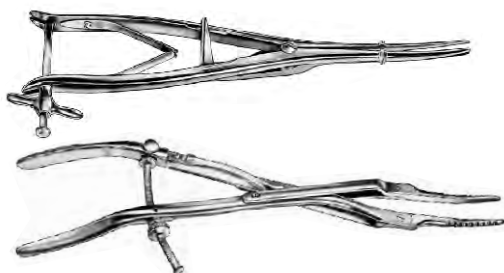

- GG-027-29** по Симсу с кремальерой, длиной 290 мм
- GG-028-34** по Гуделлу с винтовой кремальерой, длиной 340 мм

**Хирургический нож (кюретка гинекологическая)
для выскабливания слизистой оболочки матки**



Острые

- GG-830 острая № 00
- GG-030-01 острая № 0
- GG-8701 острая № 1
- GG-8702 острая № 2
- GG-8703 острая № 3
- GG-8704 острая № 4
- GG-8705 острая № 5
- GG-8706 острая № 6
- GG-09232-20 острая № 9

Тупые

- GG-840 тупая № 00
- GG-030-02 тупая № 0
- GG-8801 тупая № 1
- GG-8802 тупая № 2
- GG-8803 тупая № 3
- GG-8804 тупая № 4
- GG-8805 тупая № 5
- GG-8806 тупая № 6

**Хирургический нож (кюретка гинекологическая)
аспирационный биопсийный**



- GG-052-02 с зубчиками 2,0 мм, длиной 230 мм
- GG-052-03 с зубчиками 3,0 мм, длиной 230 мм
- GG-052-04 с зубчиками 4,0 мм, длиной 230 мм

**Хирургический нож
аспирационный биопсийный по Кеворкяну**

















- GG-054-30 с отверстиями, длиной 300 мм
- GG-055-30 сплошная, длиной 300 мм

**Хирургический нож
аспирационный биопсийный по Милану**



- GG-056-04 с навивкой 4 мм, длиной 380 мм
- GG-056-06 с навивкой 6 мм, длиной 380 мм
- GG-056-09 с навивкой 9 мм, длиной 380 мм

**Хирургический нож аспирационный
с делениями изогнутый**

		GG-057-03	диаметром 3 мм
		GG-057-04	диаметром 4,5 мм
		GG-057-06	диаметром 6 мм
		GG-057-08	диаметром 8 мм
		GG-057-10	диаметром 10 мм
		GG-057-12	диаметром 12 мм
		GG-057-14	диаметром 14 мм

**Хирургический нож аспирационный
модифицированный по Мюнхену**

		GG-053-23	с зубчиками диаметром 4,8 мм, длиной 230 мм
--	--	-----------	--



Зонд маточный с делениями по Симсу

		GD-432	прямой, длиной 320 мм
		GD-032	изогнутый, длиной 320 мм

Зонд маточный с делениями по Валексу

	GG-033-25	прямой, длиной 250 мм
---	-----------	-----------------------

Зонд маточный специального назначения

	GG-034-27	манипулятор для лапаротомии, длиной 275 мм
	GG-035-25	маточно-трубный крючок, длиной 250 мм

Зажим специального назначения для гистерэктомии



GG-036-19 латерально изогнутые, длиной 190 мм, по Бонни-Беркли




GG-037-20 латерально изогнутые, длиной 200 мм, по Майнготу



GG-038-24 латерально изогнутые, длиной 240 мм, по Майнготу

GG-039-25 сложные, длиной 250 мм, по Бонни

Зажим специального назначения щипцы полипные окончатые

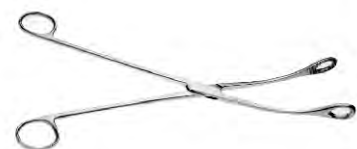

GG-700 с кремальерой, длиной 320 мм, по Келли

GG-690 с кремальерой, длиной 270 мм, по Ното

Зажим специального назначения для подъема матки



GG-044-27 длиной 270 мм, по Дартигесу



GG-045-23 длиной 230 мм, по Сомеру



GG-046-25 длиной 250 мм, по Коллину

Зажим специального назначения для оттягивания матки по Шредеру




GG-085-16 однозубые, длиной 160 мм

GG-085-19 однозубые, длиной 190 мм

GG-450 однозубые, длиной 250 мм

Зажим специального назначения для оттягивания матки по Шредеру

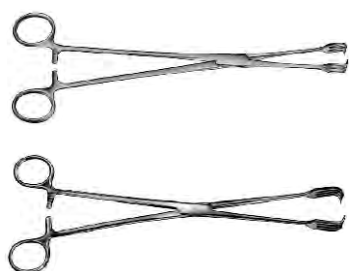

GG-086-25 двузубый, длиной 250 мм

GF-20-590-27 четырехзубые, длиной 250 мм

Зажим специального назначения для оттягивания матки по Мюзю



GG-090-06 длина 240 мм, ширина рабочей части 6 мм

GG-090-08 длина 240 мм, ширина рабочей части 8 мм

GG-090-10 длина 240 мм, ширина рабочей части 10 мм

GG-091-09 длина 265 мм, ширина рабочей части 9 мм

GG-091-11 длина 265 мм, ширина рабочей части 11 мм

GG-091-13 длина 265 мм, ширина рабочей части 13 мм

Зажим специального назначения биопсийный для шейки матки



GG-059-21 латерально-изогнутые, длиной 210 мм, рабочая часть 8,4 мм, по Фору



GG-060-21 прямые, длиной 210 мм, рабочая часть 4,8 мм, по Шуберту

GG-062-26 вертикально-изогнутые, длиной 260 мм, рабочая часть 5 мм, по Шуберту



GG-061-21 прямые, длиной 210 мм, рабочая часть 5,6 мм, по Томсу-Гейлору



GG-063-05 биопсийные щипцы для шейки матки, латерально-изогнутые, длиной 240 мм, рабочая часть треугольная 5 мм, по Шумахеру

GG-063-07 латерально-изогнутые, длиной 240 мм, рабочая часть треугольная 7 мм, по Шумахеру

**Зажим специального назначения
неразборный для биопсии конхотомного типа**



GK-9136 с крючком на рабочей части (для биопсии), без замка, длиной 210 мм, по Тишлеру



GK-9144 щелевидные, с тремя зубцами и винтовым замком, длиной 250 мм, по Кеворкяну




GK-9148 окончатые, диаметр режущего конца 2 мм, длиной 220 мм, по Берку



GG-067-24 окончатые, треугольный, диаметр режущего конца 5 мм, длиной 240 мм, по Шумахеру

**Зажим специального назначения в комплекте
разборный для биопсии конхотомного типа**

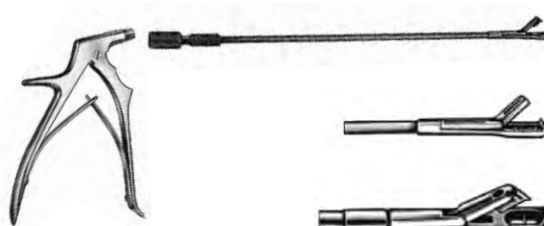

GG-068-00

Комплект разборных биопсийных щипцов:
ручка и 5 насадок



GG-069-25 насадка для биопсийных щипцов, окончатая, длиной 250 мм, по Тишлеру



GG-070-25 насадка для биопсийных щипцов, окончатая, четырехзубая, длиной 250 мм, по Кеворкяну



GG-081-25 насадка для биопсийных щипцов, окончатая, овальная, длиной 250 мм, По Эппендорфу




GG-082-25 насадка для биопсийных щипцов, окончатая, прямоугольная, длиной 250 мм, по Таунсенду

Ложка маточная острая по Шредеру



- GG-083-09 размером 9,0x5,0 мм, длиной 300 мм
- GG-083-10 размером 10,0x6,0 мм, длиной 300 мм
- GG-083-13 размером 13,0x8,0 мм, длиной 300 мм
- GG-083-14 размером 14,0x9,0 мм, длиной 300 мм
- GG-083-17 размером 17,0x10,0 мм, длиной 300 мм
- GG-083-20 размером 20,0x11,0 мм, длиной 300 мм

Ложка маточная острая с вытянутой рабочей частью по Гурдету

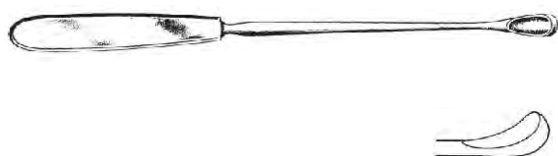

- GG-084-01 №1
- GG-084-02 №2
- GG-084-03 №3
- GG-084-04 №4
- GG-084-05 №5

Специальный инструмент для гинекологии



- GG-042-14 нож-штопор для удаления миомы, радиус навивки 14 мм, длиной 170 мм, по Дуайену
- GG-042-25 нож-штопор для удаления миомы, радиус навивки 25 мм, длиной 170 мм, по Дуайену



- GG-043-27 нож миомный, длиной 270 мм, по Сегонду
- GG-051-23 нож конический, изогнутый для рассечения фистулы, лезвие 6,3 мм, длиной 230 мм, по Айру



- GG-047-22 крючок для фистулы, плавно изогнутый, длиной 220 мм, по Эммету
- GG-048-22 крючок для фистулы, резко изогнутый, длиной 220 мм, по Эммету
- GG-049-22 крючок для фистулы, резко изогнутый под углом 90°, длиной 220 мм, по Эммету
- GG-050-22 крючок для фистулы, с двумя изгибами, длиной 220 мм, по Эммету

Механический ранорасширитель для осмотра и операций




- GG-092-00 рамка-фиксатор, 3 зеркала
- GG-092-01 зеркало размером 45x17 мм
- GG-092-02 зеркало размером 90x37 мм
- GG-092-03 зеркало размером 90x45 мм

Тазомеры



- GG-440 Тазомер по Мартину, длиной 340 мм

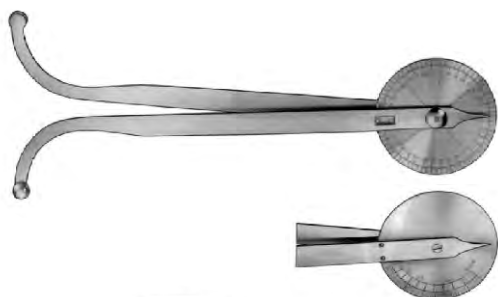

- GG-503-00 Тазомер по Толле



- GG-504-00 Тазомер по Брейски

Зажимы специального назначения
акушерские


- GG-505-23 с окончатыми губками, длиной 230 мм




- GG-506-30 с окончатыми губками, длиной 300 мм

- GG-507-30 с окончатыми губками, длиной 410 мм

- GG-508-30 с окончатыми губками, длиной 440 мм

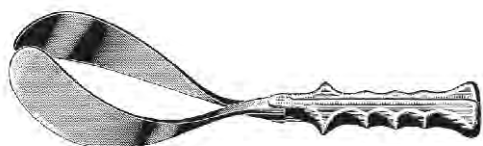

- GG-509-36 со сплошными губками, длиной 360 мм

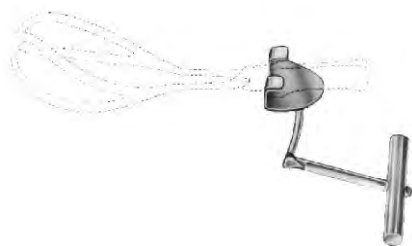

Зажим специального назначения

GG-510-00 держатель для акушерских щипцов по Биллу

**Зажим специального назначения
для удаления плодного яйца и плацентарной ткани
ложкообразный длиной 185 мм по Винтеру**



GG-513-01 №1, без кремальеры, прямые



GG-513-02 №2 без кремальеры, прямые



GG-513-03 №3 без кремальеры, прямые



GG-514-01 №1 с кремальерой, изогнутые



GG-514-02 №2 с кремальерой, изогнутые



GG-514-03 №3 с кремальерой, изогнутые



GG-515-01 №1 без кремальеры, изогнутые



GG-515-02 №2 без кремальеры, изогнутые



GG-515-03 №3 без кремальеры, изогнутые

**Зажим специального назначения
для удаления плодного яйца и плацентарной ткани
окончатый длиной 275 мм по Сенжеру**



GG-516-27 без кремальеры, прямые



GG-517-27 без кремальеры, изогнутые

GG-518-27 с кремальерой, изогнутые

**Зажим специального назначения
для удаления плодного яйца и плацентарной ткани**



GG-511-18 плоская рабочая часть, два зубца, длиной 185 мм по Виллету

**Зажим специального назначения
для удаления плодного яйца и плацентарной ткани**



GG-512-18 длиной 185 см, по Грину

Зажим специального назначения для амниотомии



GG-525-26 длиной 260 мм, по Айова

**Зажим специального назначения
костные акушерские щипцы (краниотрактор)**



GG-522-46 сложный винтовой, длиной 460 мм,
по Тарньеру



GG-523-42 винтовой, длиной 420 мм, по Брауну

Крючок хирургический



GR-9323 декапитационный, длиной 350 мм, по Брауну




GG-524-26 для амниотомии, длиной 260 мм, по Бешаму

Ложка гинекологическая



- GG-526-14** для удаления плодного яйца, шириной рабочей части 14,5 мм, длина 300мм, по Куцци
- GG-526-18** для удаления плодного яйца, шириной рабочей части 18 мм, длина 300мм, по Куцци
- GG-526-20** для удаления плодного яйца, шириной рабочей части 20 мм, длина 300мм, по Куцци

Хирургический нож- кюретка для удаления плаценты

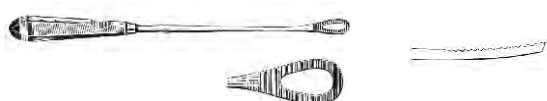

- GG-527-30** зубчатая, окончатая, длина 300 мм, по Песталоцца

Зажим специального назначения в виде перфоратора копьевидного



- GG-520-25** пружинный, длиной 250 мм

- GG-521-25** длиной 250 мм, Смелли

Зажим специального назначения



- GG-528-08** для пуповины, длина 85 мм, по Кане

- GG-529-09** для пуповины, длина 90 мм, по Коллину

Хирургические ножницы



- GG-400** для разрезания пуповины, длина 120 мм

- GG-501-15** для разрезания пуповины, латерально изогнутые, с пуговкой, длина 155 мм

Воронки ушные По Политцеру



GE-063-20	диаметр 2,0 мм
GE-063-30	диаметр 3,0 мм
GE-063-40	диаметр 4,0 мм
GE-063-5	диаметр 5,0 мм
GE-063-65	диаметр 6,5 мм
GE-063-75	диаметр 7,5 мм
GE-100-set	набор из 3 штук

Кюретка ушная двусторонняя длиной 150 мм




GE-001-10	диаметр кончиков 1,0-1,2 мм угол наклона 20°
GE-001-15	диаметр кончиков 1,5-1,8 мм угол наклона 20°

Хирургический нож-копье длиной 160 мм



GE-005-05	копьевидный, шириной 2 мм
GE-005-10	копьевидный, шириной 4 мм
GE-005-15	трапециевидный, шириной 4 мм

Конхотомы ушные с щелевидным отверстием

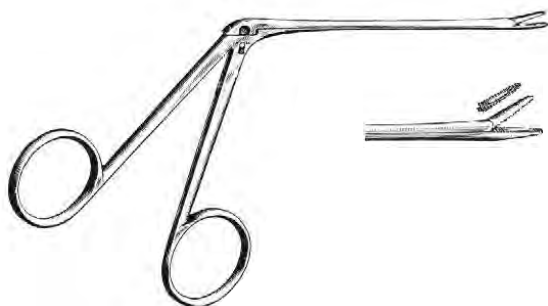


GE-070-14	длина рабочей части 85 мм, длина кончика 6 мм, ширина 1 мм
GE-072-85	длина рабочей части 85 мм, длина кончика 7 мм, ширина 2 мм
GE-073-14	длина рабочей части 140 мм, длина кончика 7 мм, ширина 2 мм

**Микрохирургические ножницы конхотомного типа.
Рабочая часть длиной 80 мм и размером кончика 4 мм**



- GE-040-04 прямые
GE-041-04 изогнуты вверх
GE-042-04 изогнуты вниз

Нож выкусыватель для молоточка длиной 80 мм

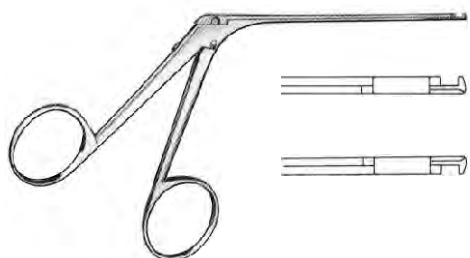

- GE-043-08 выкусывает вверх
GE-044-08 выкусывает вниз

Хирургический крючок-петля



- GE-088-12 петля размерами 3x6 мм, длиной 120 мм

Хирургический крючок-петля для удаления ушной пробки




- GE-087-01 диаметр кончика 3 x 4 мм, длиной 120 мм
GE-087-02 диаметр кончика 4 x 6 мм, длиной 120 мм
GE-087-03 диаметр кончика 4 x 9 мм, длиной 120 мм

Хирургический крючок с пуговкой



- GE-089-01 кончик 4 мм, длина 140 мм
GE-089-02 кончик 3 мм, длина 140 мм
GE-089-03 кончик 2 мм, длина 140 мм
GE-089-04 кончик 1,5 мм, длина 140 мм

Щипцы для извлечения инородного тела из уха

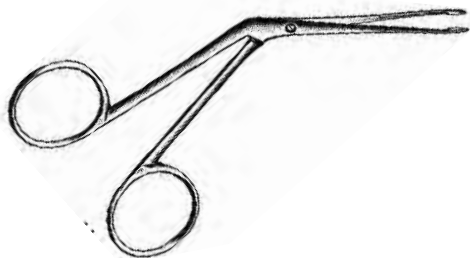

GF-260-39 длина рабочей части 120 мм
GF-069-14 длина рабочей части 140 мм

Ложка ушная двусторонняя



GE-016-18 рабочие части 4 и 5 мм, длиной 180 мм
GE-017-15 рабочие части диаметром 4 и 5 мм,
 длинной 150 мм

Элеваторы



GE-010-03 длиной 160 мм, кончик шириной 3 мм



GE-011-02 длиной 170 мм, кончик шириной 2мм
GE-011-03 длиной 170 мм, кончик шириной 3мм
GE-011-04 длиной 170 мм, кончик шириной 4мм
GE-011-05 длиной 170 мм, кончик шириной 5мм



Зеркала носовые прямые

- GE-300-12 длина губок 12 мм
- GE-300-20 длина губок 20мм
- GE-300-30 длина губок 30 мм
- GE-300-35 длина губок 35 мм
- GE-300-40 длина губок 40 мм
- GE-300-75 длина губок 75 мм



Зеркала носовые изогнутые

- GE-302-12 длина губок 12 мм
- GE-302-25 длина губок 25 мм
- GE-302-30 длина губок 30 мм



Зеркала носовые с фиксатором

- GE-303-30 длина губок 35мм
- GE-303-50 длина губок 50мм
- GE-303-75 длина губок 75мм

Пинцеты анатомические

- GE-312-11 длиной 110 мм
- GE-312-12 длиной 120 мм
- GE-312-15 длиной 150 мм
- GE-312-18 длиной 180 мм

Пинцеты хирургические

- GE-313-12 длиной 120 мм

Пинцеты перекрестные

- GE-314-13 длиной 130 мм

Пинцеты байонетные

- GE-315-14 длиной 140 мм
- GE-315-16 длиной 160 мм
- GE-315-20 длиной 200 мм


Пинцеты специального назначения

- GE-316-10 для крыла носа, шириной губок 10 мм, длиной 100 мм
- GE-317-10 для крыла носа, шириной губок 4 мм, длиной 100 мм



- GE-318-14 перегородочный пинцет, ширина губок 1,7 мм, длиной 140 мм

Языкодержатели

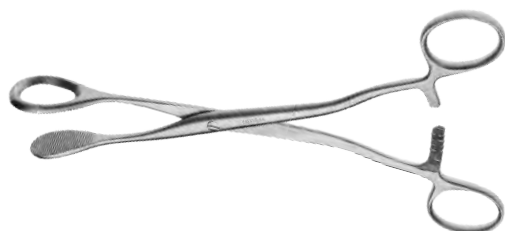

GE-605-00 длиной 140 мм
 GE-607-17 окончатый, длиной 170 мм




GE-606-72 длиной 150 мм, рабочая часть 72x23 мм
 GE-606-88 длиной 145 мм, рабочая часть 88x25 мм

Зеркала гортанные



GE-650-08 зеркало хирургическое Ø 8 мм
 GE-650-10 зеркало хирургическое Ø 10 мм
 GE-650-12 зеркало хирургическое Ø 12 мм
 GE-650-14 зеркало хирургическое Ø 14 мм
 GE-650-16 зеркало хирургическое Ø 16 мм
 GE-650-18 зеркало хирургическое Ø 18 мм
 GE-650-20 зеркало хирургическое Ø 20 мм
 GE-650-22 зеркало хирургическое Ø 22 мм
 GE-650-24 зеркало хирургическое Ø 24 мм
 GE-650-26 зеркало хирургическое Ø 26 мм
 GE-650-28 зеркало хирургическое Ø 28 мм
 GE-650-30 зеркало хирургическое Ø 30 мм

Щипцы полипные

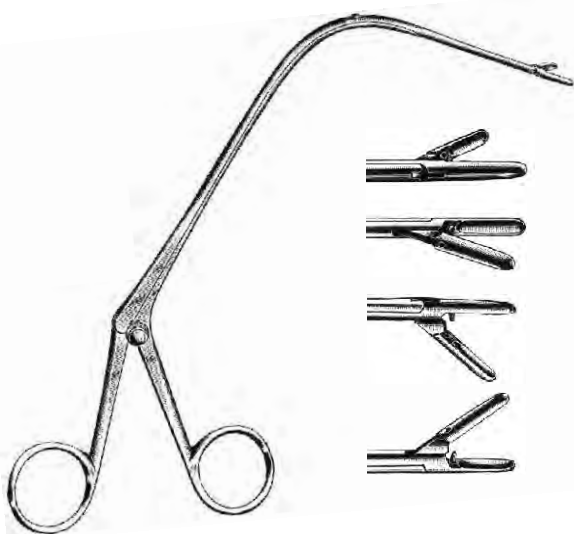

GE-625-00 длиной 230 мм, кончик 10 мм, правый

GE-626-00 длиной 230 мм, кончик 10 мм, левый

GE-627-00 длиной 230 мм, кончик 10 мм, вниз

GE-628-00 длиной 230 мм, кончик 10 мм, вверх

Крючок трахеотомический



GE-629-15 зубчатый, острый, длиной 155 мм

Зонд зобный по Кохеру



GE-630-15 длиной 155 мм

Расширитель трахеотомический



GE-631-13 длиной 130 мм

Хирургические пилы



GS-101-01 рукоятка для пилы Джигли (парные)



GS-102-33 проводник для пилы Джигли

GS-102-33P Пила Джигли

Хирургические зеркала



GI-115-18 шпатель нейрохирургический, длина 180 мм

Щипцы (кусачки) костные



GF-105-20 кусачки Дальгрена для операций на черепе

Механический ранорасширитель шарнирный с трещеткой



GR-414-01 4x4 зуба, острый, раскрытие 150 мм, длиной 310 мм

GR-414-02 4x4 зуба, тупой, раскрытие 150 мм, длиной 310 мм

GR-416-01 4x5 зубый, острый, раскрытие 150 мм, длиной 320 мм

GR-416-02 4x5 зубый, тупой, раскрытие 150 мм, длиной 320 мм



GR-725-32 7x7 зубый, тупой, длина 320 мм

Хирургические ножи Керрисона



GKK-402-15 угол 40°, длиной 150 мм, рабочая часть 2 мм

GKK-403-15 угол 40°, длиной 150 мм, рабочая часть 3 мм

GKK-404-15 угол 40°, длиной 150 мм, рабочая часть 4 мм

GKK-402-18 угол 40°, длиной 180 мм, рабочая часть 2 мм

GKK-403-18 угол 40°, длиной 180 мм, рабочая часть 3 мм

GKK-404-18 угол 40°, длиной 180 мм, рабочая часть 4 мм

GKK-405-18 угол 40°, длиной 180 мм, рабочая часть 5 мм

GKK-403-20 угол 40°, длиной 200 мм, рабочая часть 3 мм

Хирургические ножи Керрисона



GKK-403-18B байонетный, угол 40°, длиной 180 мм, рабочая часть 3 мм




GKK-902-18 угол 90°, длиной 180 мм, рабочая часть 2 мм

GKK-903-18 угол 90°, длиной 180 мм, рабочая часть 3 мм

GKK-902-215 угол 90°, длиной 215 мм, рабочая часть 2 мм

GKK-903-215 угол 90°, длиной 215 мм, рабочая часть 3 мм

Хирургические ножи

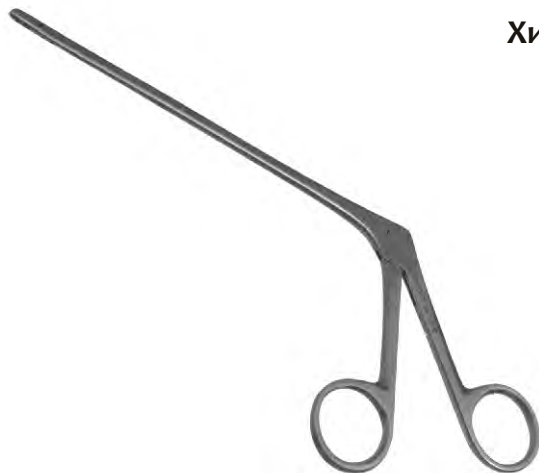

GK-145-18 угол 30°, рабочая часть 4x14 мм, длиной 180 мм, изогнут вверх



GK-146-18 угол 30°, рабочая часть 4x14 мм, длиной 180 мм, изогнут вниз



GK-147-18 угол 30°, рабочая часть 4x14 мм, длиной 180 мм, прямой, 12-3мм, длина 185 мм

Крючки специального назначения



GR-506-02 пластинчатый для нервного корешка, 45°, шириной 7 мм, длина 190 мм



GR-505-21 зубчатый Ø 7 мм, двузубый, с пружиной, длина 310 мм



GR-501-20 зубчатый 90°, длина 190 мм

Крючки специального назначения для отведения нервов



GR-530-01 зубчатый 90°, с пуповкой Ø 0,8 мм,
длина 190 мм

Крючки специального назначения для тупого разделения тканей и выделения трубчатых органов



GR-213-02 зубчатый плоский, изогнутый, шириной
3 мм, длина 230 мм

Крючки специального назначения – вилка для спуска лигатуры на сосуды



GR-300-23 зубчатый N1, длина 200 мм

Распатор байонетный изогнутый вверх тупой с плоской рабочей частью



GR-231-01 ширина 2 мм, длина 230 мм
GR-231-02 ширина 4,5 мм, длина 230 мм

Распатор в виде овальной лопатки



GR-505-06 изогнут под 45°, ширина 2 мм,
длина 190 мм

Хирургические ножи








GR-500-01 тупоконечный, ширина 1,8 м,
длина 190 мм



GR-500-30 изогнут, овальная лопатка шириной
3 мм, длина 230 мм

Хирургические ножи кюретки

	GK-501-40	прямая, Ø 4,5 мм, длина 230 мм
	GK-502-40	подвижная, Ø 4 мм, длина 260 мм
	GK-504-03	подвижная, Ø 6,5 мм, длина 215 мм
	GK-503-01	острая, Ø 4 мм, горизонтально изогнута под 45°, длина 180 мм
		




Микрохирургические ножницы

	GS-400-19	остроконечные, изогнуты вверх под 45°, длина 195 мм
---	------------------	---

Микрохирургические ножницы байонетные

	GS-504-20	изогнуты на кончике, острые, длина 200 мм
	GS-523-20	остроконечные, горизонтально-изогнуты под 45°, длина 200 мм
	GS-524-20	один конец острый, другой с пуговкой, длина 200 мм
	GS-525-19	остроконечные, изогнуты на 125°, длина 190 мм
	GS-637-02	остроконечные, вертикально-изогнуты, рабочие части 12 мм, длина 155 мм

Микрохирургические ножницы остроконечные

	GS-623-01	прямые, рабочие части 14 мм, длина 185 мм
	GS-628-14	вертикально-изогнуты, рабочие части 10 мм, длина 130 мм
		

**Микрохирургический пинцет
байонетный окончатый стальной**



- GF-520-04 изогнут вниз, рабочие части \varnothing 4 мм,
длина 210 мм
GF-492-05 прямой, рабочие части \varnothing 5 мм,
длина 220 мм

**Микрохирургический пинцет
байонетный армированный твердым сплавом 1x2 зубый титановый**



- GF-31201T длина 190 мм
GF-31231T длина 230 мм
GF-31251T длина 250 мм

**Микрохирургический пинцет
байонетный окончатый армированный твердым сплавом титановый**



- GF-31302T длина 190 мм
GF-31312T длина 210 мм
GF-31332T длина 230 мм

**Микрохирургический иглодержатель
байонетный армированный твердым сплавом титановый**



- GN-32114T изогнутый, длина 185 мм
GN-32133T изогнутый, длина 230 мм

Остеотомы



- GK-142** 140 мм, длина лезвия 10 мм
- GK-144** 140 мм, длина лезвия 12 мм
- GK-146** 140 мм, длина лезвия 12 мм
- GK-148** 140 мм, длина лезвия 16 мм

Распаторы



- GK-280** прямой, длина 150 мм
- GK-290** изогнутый, длина 150 мм



- GK-300-1** реберный, левый, длина 180 мм
- GK-300-2** реберный, правый, длина 180 мм



- GR-030-05** рабочая часть 5 мм, длина 170 мм
- GR-030-07** рабочая часть 8 мм, длина 160 мм




- GR-030-08** рабочая часть 8 мм, длина 200 мм
- GR-030-10** рабочая часть 10 мм, длина 200 мм

**Распатор элеватор Нойманн
пластинчатый S-образно изогнутый с заточенными краями**



- 11-661** рабочая часть 18 мм, длина 235 мм

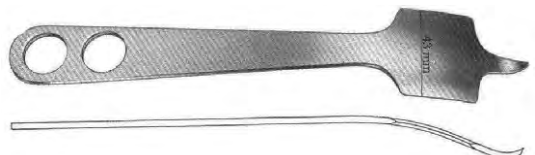

- 11-663** рабочая часть 43 мм, длина 235 мм

Распатор элеватор Нойманн сильно-изогнутый



- 11-667** рабочая часть 43 мм, длина 235 мм

Хирургическое долото



- GK-156** длина 140 мм



- GK-182** с шестигранной ручкой, прямое, рабочая часть 15 мм, длина 200 мм



- GK-186** с шестигранной ручкой, прямое, рабочая часть 25 мм, длина 200 мм



- GK-192** с шестигранной ручкой, полукруглое, рабочая часть 15 мм, длина 200 мм

Ложки костные



GK-272 двусторонняя, 165 мм



DS-6695D с ручкой, ширина ложки 5 мм, длина 170 мм

DS-6697D с ручкой, ширина ложки 8 мм, длина 170 мм

DS-6699D с ручкой, ширина ложки 10 мм, длина 170 мм

Костодержатель мощный длина 260 мм



GF-432



11-739

с кремальерой

Костодержатели с кремальерой



DGF-1016

длина 170 мм



DGF-1018

изогнутый, длина 190 мм



GF-800-14

зубчатый, длина 140 мм



GF-801-13

острый, длина 135 мм

GF-792-17

острый, длина 175 мм

GF-526-13



GF-774-18

репозиционный, длина 180 мм



GF-482-15

самоцентрирующийся, длина 155 мм

Костодержатель в виде «клешни»



GF-834-21 прямой, рабочая часть 35 мм,
длина 210 мм



GF-827-23 изогнутый, рабочая часть 30 мм,
длина 235 мм



GF-784-14 рабочая часть 25 мм,
длина 155 мм



GF-795-16 рабочая часть 25 мм,
длина 160 мм

Костодержатель в виде «цапки»



GF-770-20 рабочая часть 70 мм, длина 205 мм

GF-772-17 рабочая часть 55 мм, длина 175 мм



GF-792-17 рабочая часть 35 мм, длина 175 мм



GF-178-13 винтовой по Лоуману,
длина 130 мм



GF-780-20 для хрящевых тканей,
длина 205 мм

Щипцы для удерживания и захватывания костей



GF-3901

Зажим спец назначения



GF-764-01 для удерживания сухожилий, изогнутый, длина 155 мм

Щипцы кусачки костные с овальными губками



GF-221-1 изогнутые, длина 180 мм
GF-221-2 прямые, длина 180 мм

Щипцы кусачки костные с овальными губками вертикально-изогнутые ложкаобразные



GT-100-15 угол 20°, длина 150 мм
GT-100-18 угол 20°, длина 180 мм
GT-100-16 угол 30°, длина 165 мм
GT-100-14 угол 45°, длина 145 мм

Щипцы кусачки костные двухшарнирные



GF-222 тупые, длина 190 мм
GF-902-02 слабоизогнутые, длина 240 мм
GF-902-03 сильноизогнутые, длина 240 мм



GF-961-15 острые, длина 150 мм



GF-630 с удлиненными ручками, длина 275 мм

Щипцы кусачки костные двухшарнирные

**GF-554-02-17**

изогнутые под углом 30°, армированные твердым сплавом, длина 180 мм

GF-13-22323

изогнутые под углом 40°, армированные твердым сплавом, длина 230 мм

Щипцы для скусывания спиц и проволоки двухшарнирные армированные твердым сплавом

**GF-13-23422**


торцевые, длина 225 мм

**GT-707-22**

вертикально-изогнутые, длина 220 мм

GT-707-23

вертикально-изогнутые, длина 230 мм

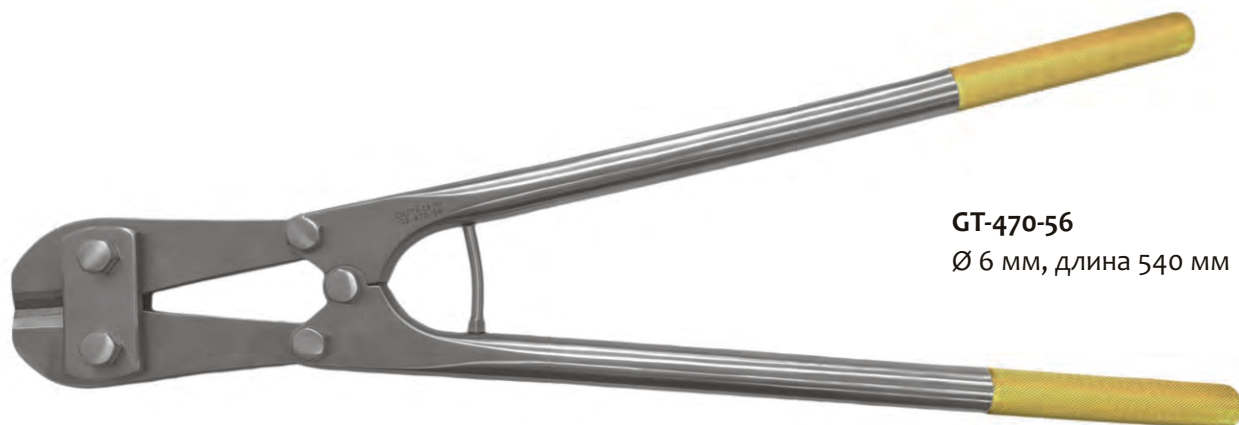**GT-470-56**

Ø 6 мм, длина 540 мм

Щипцы для скусывания спиц и проволоки конусообразные с шахматной насечкой



- GT-219-01** для жестких (до Ø 1,0 мм) и мягких (до Ø 1,5 мм) спиц, длина 150 мм
- GT-219-02** для жестких (до Ø 1,2 мм) и мягких (до Ø 1,5 мм) спиц, длина 160 мм



- GF-818-17** зажим специального назначения для проволоки, армированный твердым сплавом, длина 170 мм



- GS-13-224-02** хирургические ножницы для откусывания проволоки до 1,5 мм, армированные твердым сплавом, длина 140мм

Щипцы кусачки костные по Листону



- GFK-136-12** длина 120 мм
- GF-724** длина 140 мм
- GF-604** длина 180 мм

Щипцы кусачки костные для ногтей



- GF-46-11** прямые, длина 100 мм
- GFK-144-11** изогнутые, длина 110 мм

Специальный инструмент хирургические ножницы



GS-104-27 гильотинные, реберные, 230 мм

Специальный инструмент для удаления гипса



CS-02705 для разрезания гипса, 370 мм



GF-232-27 щипцы для отгибания гипса

Пила хирургическая для разрезания гипсовых повязок



TS-114-14 длина 140 мм



TS-12-110-18 полотно 110 мм, длина 180 мм



GS-130-29 рамочная с запасным лезвием,
длина 350 мм



11S-022 длина 230 мм

Специальный инструмент для урологии



GR-126-27 зеркало для отведения мочевого пузыря, длина 240 мм

Наборы уретральных бужей




GD-1401 набор уретральных бужей, изогнутых, 18 штук

GD-15089z набор уретральных бужей, прямых, от 6 до 10 мм (набор из 5 штук)




GF-101-23 щипцы для извлечения почечных и печеночных камней

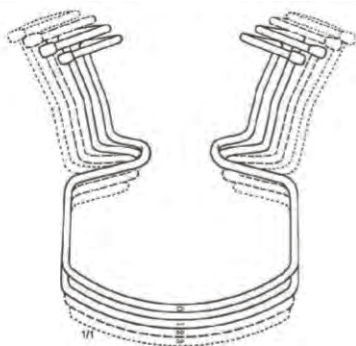

Механические расширители

GE-607-13
ретрактор губной
в наборе
раскрытие:
0-95 мм
1-100 мм
2-105 мм
3-110 мм

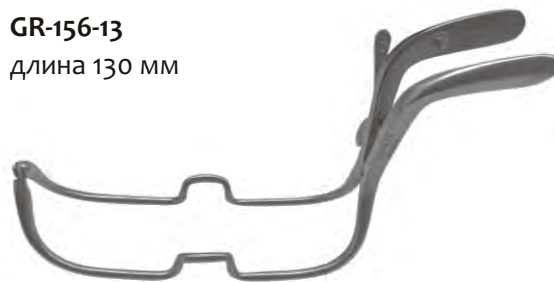

GR-156-13
длина 130 мм

Крючки стоматологические



GR-10134 двусторонний, зубчатый,
с градуировкой от 1-10

GR-10137 двусторонний, зубчатый, круглый и прямой

GR-10139 двусторонний, зубчатый, прямой, изгиб
с разными углами



GD-100-17 двусторонний с круглой ручкой, зубчатый,
ширина прямой части 1,8 мм, изогнутость
второй под углом 1,8 мм, длина 170 мм

GD-101-17 двусторонний с круглой ручкой, зубчатый,
ширина прямой части 2,5 мм, изогнутость
второй под углом 2,5 мм, длина 170 мм



GD-103-17 двусторонний с круглой ручкой, зубчатый,
один рабочий кончик в виде иглы Ø 2,5 мм,
второй кончик изогнут на 2,5 мм,
длина 170 мм

Распатор односторонний для удаления зубного камня

GR-10529 конусообразный

GR-10530 трапециевидный

Распатор элеватор

GV-40001 без насечек на рабочей части,
рабочая часть 2,5 мм

GV-40002 без насечек на рабочей части,
рабочая часть 23 мм

GV-40021 с насечками на рабочей части,
рабочая часть 2,5 мм

GV-203-00 с насечками на рабочей части,
рабочая часть 3 мм, длина 150 мм

GV-204-00 с насечками на рабочей части,
рабочая часть 4 мм, длина 150мм



**Зажимы специального назначения
для удаления осколков и штифтов**



- GF-111-13 прямой, длина 135 мм
- GF-112-13 изогнутый, длина 135 мм

Щипцы для удаления зубов



- 01D-027 горизонтально-изогнутые




- 01D-016 вертикально-изогнутые, с отверстием
на губках



- 01D-028 прямые

Щипцы кусачки для стоматологии

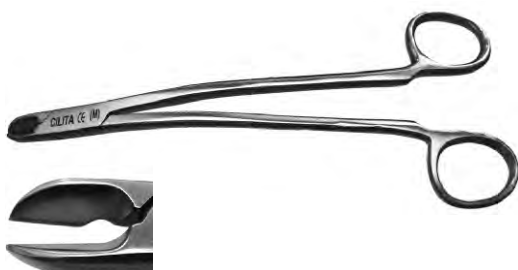

- 01V-017 боковой рез, изогнутые ручки,
длина 190 мм

Наборы инструментов хирургических для лицензирования медицинской деятельности

ОХ	Поликлинический набор
ОХ	Набор для торакальной хирургии
ОХ	Большой хирургический набор
ОХ	Малый хирургический набор
ОХ	Набор для абдоминальной хирургии детский
ОХ	Неонатальный набор
ОХ	Набор для трансплантации
Гинекология	Набор смотровой гинекологический
Гинекология	Набор гинекологический большой
Гинекология	Набор гинекологических малый
Гинекология	Набор для родовспоможения
Гинекология	Набор для осмотра родовых путей
ЛОР	Набор поликлинический ЛОР
ЛОР	Набор для диагностики и хирургии ЛОР
ЛОР	Набор для осмотра ЛОР органов
ЛОР	Набор для удаления инородных тел ЛОР органов
ЛОР	Набор для микроопераций на ухе
ЛОР + Пластика	Набор для блефаропластики
ЛОР + Пластика	Набор для отоластики
ЛОР + Пластика	Набор для ринопластики
ЛОР + Пластика	Набор для септоластики
ЛОР + ЧЛХ	Набор для ЧЛХ
МИКРО	Набор для микрохирургии кисти и стопы
ССХ	Набор для микрососудистой хирургии
ССХ	Набор для сосудистой хирургии большой
ССХ	Набор для периферийной сосудистой хирургии
НЕЙРО	Набор нейрохирургический большой
НЕЙРО	Для микронеурхирургии (голова-шея)
Травма	Набор амбулаторный для травматологии и ортопедии
Травма	Набор перевязочный
Травма	Набор травматологический большой
Проктология	Набор проктологический
Проктология	Набор для операций свищей
Проктология	Набор для колопроктологии
Урология	Набор урологический

Рекомендации по уходу за инструментами.

Важным критерием долгой службы и гарантии качества служит правильное хранение и обработка инструментов.

Новые инструменты следует хранить только в сухом месте при комнатной температуре. Нельзя хранить инструменты рядом с химическими реагентами.

Обработка использованного инструментария должна начинаться уже в операционной перед укладкой инструментов и включает в себя первичную очистку от крупных загрязнений и разъедающих веществ. Укладка инструментов из нержавеющей стали в изотонические растворы приводит к коррозии.

Инструмент необходимо укладывать аккуратно. Ёмкости с грязным инструментом должны быть закрыты во избежание дальнейшего присыхания загрязнений.

Инструменты с шарнирами (ножницы, зажимы, щипцы) следует раскрыть, чтобы сократить до минимума перекрытые поверхности. Разборные инструменты следует разобрать. Инструменты, не использованные при выполнении хирургических операциях, следует обрабатывать так же, как и использованные.

Для микрохирургических инструментов следует применять специальные стойки или крепления для укладки, а также при необходимости тележки со специальной техникой мойки. При ручной обработке должны применяться активные, не фиксирующие протеин, чистящие средства с антибактериальным действием или без него и/или с энзимами. Если требуется дезинфекционное действие, то должна быть подтверждена его эффективность в условиях значительного загрязнения протеинами в соответствии со стандартами EN или согласно ГОСТ. Порошкообразные продукты должны быть полностью растворены.

Недопустимо применения металлических щеток, абразивных средств, применение грубой силы.

При машинной обработке важным условием эффективности является правильная загрузка лотков, подносов и пр. Не допустимо перегружать лотки, так как инструменты омываются раствором со всех сторон. Инструменты вынимаются сразу после завершения программы обработки для предотвращения возможности коррозии из-за остаточной влажности.

При стерилизации важно следовать температурным предписаниям:

- от 105 до 134°C – паровая стерилизация (автоклавирование);
- от 60 до 200°C – воздушная стерилизация (сухим горячим воздухом);
- от 35 до 50°C - пероксидно-плазменная стерилизация (как альтернатива низкотемпературной газовой стерилизации).

Бережное отношение к инструменту – гарант долгой службы!

Наличие качественного медицинского инструментария – залог успешной работы врача!

CILITA

ООО «ЦИЛИТА»
390044 г. Рязань,
Московское шоссе, д. 20
Тел./Факс: +7 4912 77 96 78
e-mail: sales@cilita.com

CILITA LTD
20, Moskovskoye shosse,
Ryazan 390044, Russia
Ph/fax: +7 4912 77 96 78
e-mail: sales@cilita.com